

Betjeningsvejledning

CEKURA watch



Modern



Classic



Active

Tillykke med dit nye CEKURA watch – din mobile tryghedsalarm som du kan tage med dig overalt. CEKURA watch er digitale ure udstyret med funktioner såsom, SOS knap, positionsangivelse (GPS), GEOfence, pulsmåler, fald notifikation, påmindelser, tilkobling til CEKURAs egen døgnbemandede vagtcentral (Tryghedscentret) via alarmaktivering fra SOS knappen.

Funktionerne i de respektive modeller af CEKURA watch afhænger af den valgte model. For nærmere information om netop den model du har valgt henvises til afsnittene længere fremme i nærværende vejledning eller ved at besøge vores hjemmeside www.cekura.dk.

Vi håber, at du bliver glad for dit CEKURA watch og vores Tryghedsservice.

Med venlig hilsen
CEKURA A/S

Vi anbefaler dig at læse nedenstående inden ibrugtagning af dit CEKURA watch

1. Du bedes kontrollere, at det er den ønskede model du har modtaget og at æsken indeholder:
 - 1 stk. CEKURA watch inkl. urrem
 - 1 stk. USB kabel til opladning
 - 1 stk. Betjeningsvejledning
2. Du bedes sørge for at have et nano simkort som supporterer GSM netværket (2G). Simkortet skal have aktiveret GPRS data samt nummer identifikation.
3. Du bedes sørge for at CEKURA watch er slukket i forbindelse med indsættelse af nano simkortet.

Bemærk! Har du fra begyndelsen tilkøbt CEKURA Tryghedsservice sammen med dit CEKURA watch – dvs. SOS knappen på alarmen er tilkoblet CEKURA døgnbemandet Tryghedscenter, kan du se bort fra ovenstående pkt. 2 og 3, da et aktivt simkort allerede er isat enheden og klargjort til brug.

4. Du bedes oplade dit CEKURA watch ved at forbinde det medfølgende USB kabel til en computer eller evt. den tilkøbte adapter til en stikkontakt. **Bemærk!** Oplad ikke dit CEKURA watch mere end 3 timer.
5. Er du interesseret i at gøre brug af den tilgængelige app sammen med dit CEKURA watch, finder du en QR kode i bunden af æsken. Scan denne og du vil blive guidet videre til download. **Bemærk!** CEKURA supporterer ikke applikationen.

CEKURA watch - Modern



Funktioner:


- **SOS alarm funktion** som kan tilkobles CEKURA døgnbemandede Tryghedscenter
- Lokation funktion (inkl. lokationshistorik)
- Geofence funktion
- Lavt batteri funktion
- Tovejs samtalefunktion
- Skridttæller funktion
- Fjernafbrydelse funktion
- Ingen-forstyrrelse funktion

Specifikationer

- Skærm: 0,96 tommer OLED

- GPS +LBS+WIFI Realtime positionering
- Batteri: Lithium batteri
- Standby tid: op til 5 dage (ca. 100 timer)
- Simkort: Micro simkort
- Størrelse: 31 x 52 11.8 mm
- App tilgængelig til IOS og Android platforme

Skærbillede:

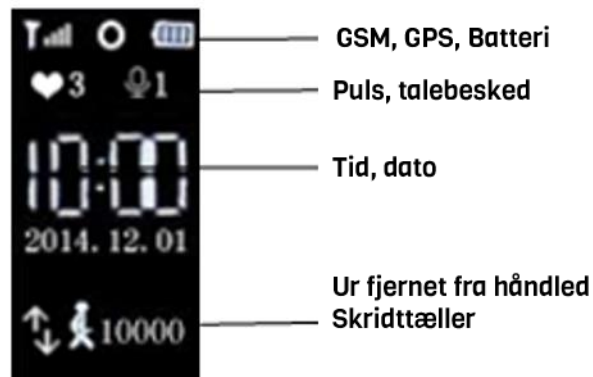

Øvrigt:

- SOS knappen sidder i nederste højre hjørne på siden af uret – og skal holdes inde i ca. 5 sek. For at aktiverer en alarm.
- SOS knappen bruges også til at tænde uret. Uret kan ikke slukkes igen af sikkerhedsmæssige årsager (undtaget er når det løber tørt for batteri).
- Porten til opladning sidder i venstre side af uret, hvor en lille slot skal åbnes for at indsætte USB ladekablet.

Note! Uret tåler ikke at blive båret i bad eller når du er ude at svømme.

CEKURA watch – Classic



Funktioner:

- **SOS alarm funktion** som kan tilkobles CEKURA døgnbemandede Tryghedscenter
- Lokation funktion (inkl. lokationshistorik)
- Geofence funktion (200m – 2000m)
- Pulsmåler funktion
- Lavt batteri funktion
- Ur bæres ikke funktion
- Tovejs samtale funktion
- Skridttæller funktion
- Fjernafbrydelse funktion
- Ingen-forstyrrelse funktion

Specifikationer

- Skærm: 1,22 tommer OLED
- GPS +LBS+WIFI multi-mode positionering
- Batteri: Lithium batteri
- Standby tid: op til 4 dage (ca. 70) timer
- Simkort: Micro simkort
- Størrelse: 46 x 36 x 16 mm
- App tilgængelig til IOS og Android platforme

Skærbilleder:




Hovedskærbillede

Ikoner øverst (fra venstre):

- GSM signal
- Netværk
- GPS
- Strøm

Midterst på siden:


- Tid
- Ugedag
- Dato

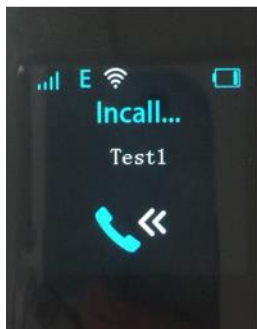

Opkald skærbillede

Besvar opkald: Tryk knap 1


Afslut opkald: Tryk knap 2

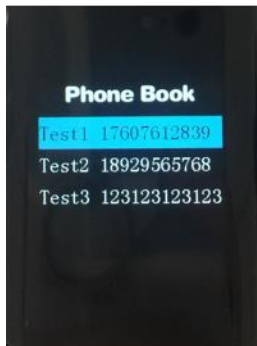

Telefonbog skærbillede

Hukommelse: 15 numre
(via app)

Foretag opkald: Tryk knap 1

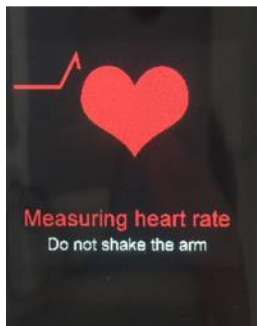

Pulsmåling skærbillede (skal bæres om armen)

Pulsmåling: langt tryk knap 1

→ Måling påbegyndes, afvent
Ca. 20 sek. for resultat

Øvrigt:

- Pulsmåler aktiveres ved at trykke på øverste venstre knap. Pulsmåleren måler pulsen i ca. 30 sek., hvorefter den slår fra.
- SOS knappen sidder i nederste højre hjørne på siden af uret og skal holdes inde i ca. 5 sek. for at aktivere en alarm.
- SOS knappen bruges også til at tænde uret. Uret kan ikke slukkes igen af sikkerhedsmæssige årsager (undtaget er når det løber tørt for batteri).
- Porten til opladning sidder i højre side af uret, hvor en lille slot skal åbnes for at indsætte USB ladekablet.

Note! Uret tåler ikke at blive båret i bad eller når du er ude at svømme.

CEKURA watch – Active

Knap 1:

- Optag/afspil samtale

Knap 2:

- **SOS knap**
- Tænd/sluk knap
- Afbryd samtale



- Magnetisk opladning
- Simkort port

- ### Knap 3:
- Juster volumen op

- ### Knap 4:
- Juster volumen ned
 - Telefonbog
 - Foretag opkald (langt tryk)

Funktioner:


- **SOS alarm funktion** som kan tilkobles CEKURA døgnbemandede Tryghedscenter
- Fald funktion
- Lokation funktion (inkl. lokationshistorik)
- Geofence funktion (200m-2000m)
- Pulsmåler funktion

- Medicin påmindelsesfunktion
- Lavt batteri funktion
- Ur bæres ikke funktion
- Stillesiddende funktion
- Tovejs samtalefunktion
- Skridttæller funktion
- Fjernafbrydelse funktion
- Ingen-forstyrrelse funktion

Specifikationer

- Skærm: 1,54 tommer LCD touch
- GPS +LBS+WIFI multi-mode positionering
- Batteri: Gel polymer
- Standby tid: op til 5 dage (ca. 100) timer
- Simkort: Micro simkort
- Størrelse: 35 x 60 x 13 mm
- App tilgængelig til IOS og Android platforme

Skærbilleder:

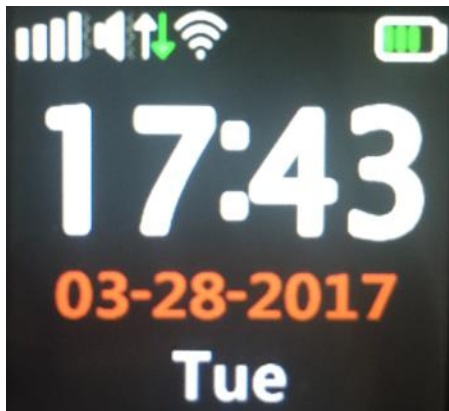


Hovedskærbillede

Ikoner øverst (fra venstre):

- GSM
- Opkaldstilstand
- Netværk
- Wifi
- Strøm

Midterst på siden:

- Tid, dato, ugedag

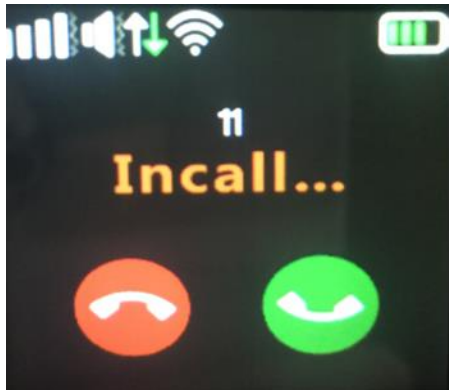

Opkald skærbillede

Besvar opkald: Tryk grønt ikon

Afslut opkald: Tryk knap 2



Opringning skærbillede

Du kan ringe til alle telefonnumre.




Telefonbog skærbillede:

Hukommelse indtastes i app.

Scroll up: knap 3


Scroll down: knap 4

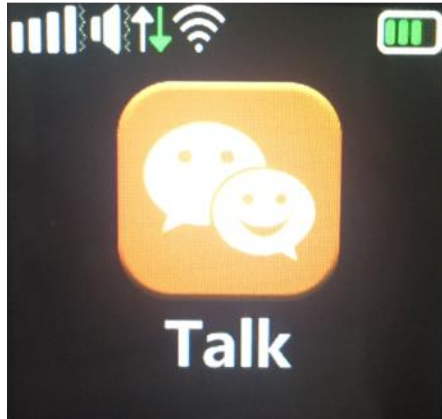

Talebesked skærmbillede:

Talemeddelelse: Tryk på skærmen


Længste meddelelse 15 sek.

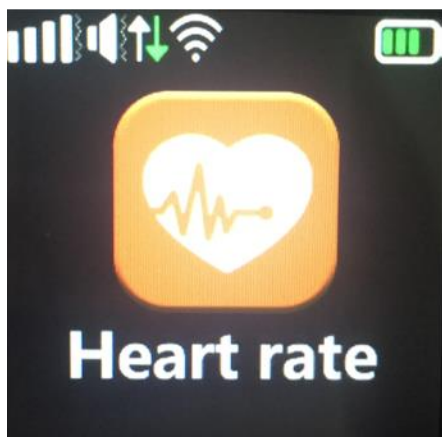

Pulsmåler skærmbillede
(skal bæres om armen)

Pulsmåling: Tryk på skærmen


→ Måling påbegyndes, afvent
30 sek. Resultat ses på skærmen.

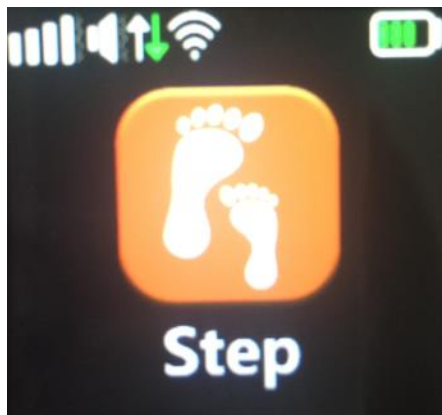

Skridttæller skærmbillede

Standardindstilling: slået fra
(slå til via app)


Når skridttæller er slået til
vil der være automatisk
Synkronisering med.

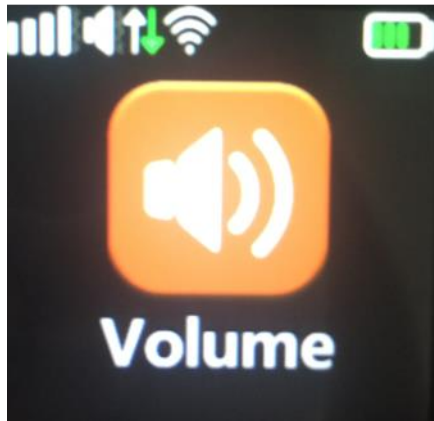

Volumen skærmbillede


Volumen op: knap 3

Volumen ned: knap 4

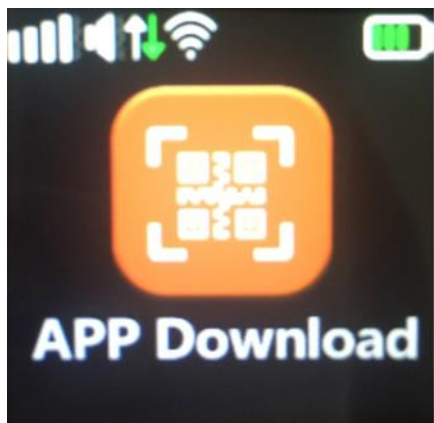

App download skærmbillede:

Scan QR kode i bunden af æske.

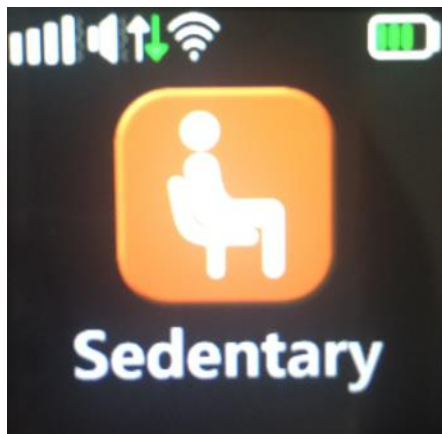


Stillesiddende skærmbillede

Indstillinger: Tryk på skærmen

Åben/luk notifikation for når bruger er stillesiddende for længe.

Tidsrum: 30 min. – 200 min.
Intervaltid: 10 min.

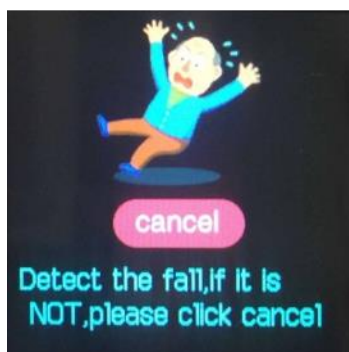

Fald skærmbillede:

Når uret registrerer et fald/hårdt stød aktiveres SOS kald til indtastet nummer.

→ Er det en fejl, tryk på "cancel"
→ indenfor 3 sekunder

Øvrigt:

- Pulsmåler aktiveres ved at finde frem til rette skærbillede jf. ovenstående og trykke på ikonet. Afvent herefter 30 sekunder og aflæs resultat på skærmen.
- SOS knappen sidder i nederste venstre hjørne på siden af uret og skal holdes inde i ca. 5 sek. for at aktivere en alarm.
- SOS knappen bruges også til at tænde uret. Uret kan ikke slukkes igen af sikkerhedsmæssige årsager (undtaget er når det løber tørt for batteri).
- Opladning foregår via det medfølgende USB kabel og den magnetiske plade bagpå uret.

Note! Uret tåler ikke at blive båret i bad eller når du er ude at svømme.