


IVISKIN

IVISKIN G4 IPL hårfjerning




Brugervejledning

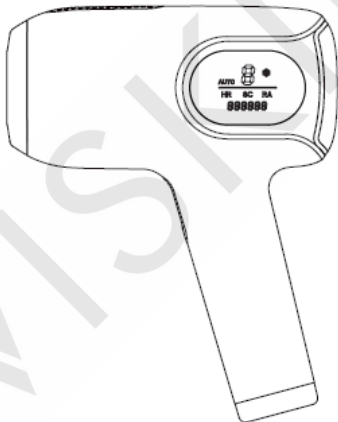

Læs brugermanualen grundigt før brug

Innholdsfortegnelse

1.Beskrivelse af knapper.....	S.4
2.Før du bruger enheden.....	S.6
3.Sikkerhedsforanstaltninger.....	S.6
4.Produktet bør ikke bruges af.....	S.8
5.Hvor kan enheden bruges?.....	S.9
6.Undgå å bruge IPL på:.....	S.9
7.Det anbefales at udføre en test inden brug.....	S.9
8.Hvordan komme man i gang med at bruge IPL hårfjerning?.....	S.10
9.Instruktioner.....	S.10
10.Indstillinger for lyseffekt.....	S.11
11.Soleksponering under behandling.....	S.12
12.Fejlsøgning.....	S.13

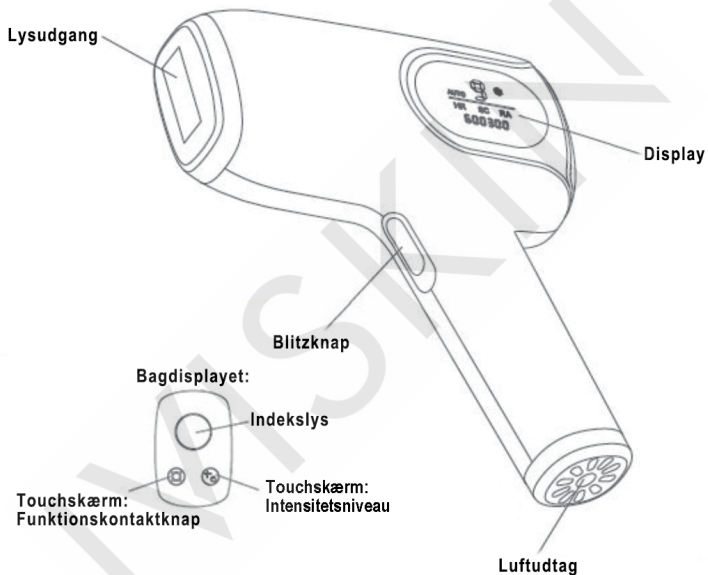1. Beskrivelse af knapper:



LCD-skærm	Funktion
HR	Hårfjerning
SC	Hudforyngelse
RA	Bumser
	IceShield
AUTO	Automatisk lystilstand
Niveau 1-9	Lysintensitet
Seks cifre	Resterende antal lysblink.
	Funktionskontakt-knap, tilgængelig i "HR". Veskler mellem "SC", "RA" og "IceShield".
	Tryk og hold knappen inde i 2 sekunder for at tænde og slukke maskinen.
	Tryk en gang på knappen for at skifte intensitet. Intensiteten kan indstilles på 9 forskellige niveauer.

2. Før du bruger enheden:

Vælg din hudtype, som du finder på hudfarvekontrolbilledet nedenunder. Brug ikke denne enhed, hvis du har mørk hud, da det kan føre til uheldige reaktioner i huden som pigmentering og depigmentering, alvorlig rødmen, hævelse eller svie.



3. Sikkerhedsforanstaltninger:

Disse sikkerhedsforanstaltninger udgør generelle anbefalinger for at sikre en tryk anvendelse af IPL-teknologien hjemme. Selvom de ikke er eksklusive for vores model, repræsenterer de god praksis, der bidrager til en sikker og effektiv behandling.

- Undlad at påføre creme eller plejeprodukter inden brug, da det kan blokere hårsækkene og hindre lysets effekt eller forårsage reaktioner.
- Brug ikke enheden i badekar, bruser eller i kontakt med vand.
- Opbevar enheden på et tørt sted og undgå direkte sollys.
- Sørg for, at huden på det behandlede område er tør og ren, da dette kan påvirke behandlingens effektivitet og forhindre forventet lysblink.
- Anbefalingen er, at brugere af vores IPL-hårfjernere er 18 år eller ældre. Hvis du er under 18, kræves forældres samtykke.
- Hvis du er under 18 år og har følsom hud, bør du kontakte en læge for rådgivning om IPL-brug.
- Tjek regelmæssigt for snavs på blitzvinduet for at undgå forbrændinger og fejl under brug.

- Undlad at blokere udluftningen under brug for at undgå røg og brand.
- Indstil styrkeniveauet i overensstemmelse med din hudtype. Se punkt nr. 8, Hvordan komme i gang.
- Ved tegn på hudirritation eller rødme efter behandling, undlad at påføre produkter på huden, indtil symptomerne aftager. Hvis irritationen fortsætter, skyl straks med vand. Stop brugen af produktet ved vedvarende symptomer og kontakt sundhedspersonale.
- Dette produkt skal kun anvendes i overensstemmelse med dets formål. Følg de generelle sikkerhedsinstruktioner i brugervejledningen for at undgå ulykker som elektrisk stød, forbrændinger eller andre skader grundet forkert brug.
- At anvende intens pulserende lys til hårfjerning kan for nogle resultere i den modsatte effekt, nemlig øget hårvækst. Ifølge den seneste forskning er kvinder fra Middelhavsområdet, Mellemøsten og Sydasiens, der gennemgår behandling i ansigtområdet, særligt sårbare. Fænomenet kaldes "paradoks hypertrikose" eller "paradoks hårvækst" og forekommer sjældent. Det er vigtigt at bemærke, at personer med en mørkere hudfarve kan opleve forskellige resultater og potentielle bivirkninger sammenlignet med dem med en lysere hud, uanset enhedstype.
- Hudirritation fra aktiviteter som barbering bør heles før brug af enheden.
- Undlad selvbrunercreme eller nogen form for selftan under behandlingen.
- En tæt barbering anbefales, da lysenergien skal nå hårsækken hurtigst muligt for optimale resultater. Vent 24 timer efter voksning, plukning eller epilering, før IPL-behandling.
- Dette værktøj er ikke beregnet til personer med begrænset fysisk, sensorisk eller kognitiv kapacitet, medmindre de modtager vejledning fra en erfaren person.
- Overvåg børns interaktion med enheden for at forhindre risici som

eksponering for lys, elektrisk fare eller farer knyttet til enhedens komponenter.

- Overhold den anbefalede behandlingsfrekvens for optimale resultater, og undgå overdreven brug, da det kan øge risikoen for hudbivirkninger.
- Hvis plastikkirurgi bliver nødvendig efter hårfjerning (kun i det behandlede område), konsulter en læge.
- Kontakt også læge, hvis du føler dig syg eller utilpas efter brug.
- Brug de medfølgende beskyttelsesbriller under behandlingen.

4. Produktet bør ikke bruges af:

- Gravide kvinder, ammende kvinder, ar på kroppen, diabetes, sensitiv hud og lyssensitiv hud.
- Personer med alvorlig hjertesygdom, moderat til svær hypertension, ondartede svulster, folliculitis, infektiøs hudsygdom, forbrændt hud og koagulationsforstyrrelser.
- Personer med unormal kollagenmetabolisme, herunder historik med ardannelse og dårlig sårheling.
- Patienter med vaskulære sygdomme som åreknuder på bestrålingsstedet.
- Patienter med udbrud af herpes simplex, hudlæsioner og hæmatom.
- Personer med immunsygdomme (dette inkluderer HIV, porfyri etc.).
- Enhver patient med blødningsforstyrrelse og patienter, som bruger isotretinoin, frugtsyre (AHA), salisyre (BHA) eller azaleasyre.
- Brug venligst dette produkt med forsigtighed, hvis du har brugt kemisk hårfjerning inden for de sidste 30 dage. Dette gælder også, hvis du for nylig har brugt hudblegningsprodukter eller produkter med A-vitamin-ingredienser.
- Brug ikke enheden, hvis du har indtaget aspirin, immundæmpende lægemidler og andre lægemidler.

5. Hvor kan enheden bruges?

IVISKIN IPL hårfjerner kan bruges over hele kroppen, så længe det er under næsetippen! Dette er vores anbefaling, da vi ønsker, at brugere skal undgå at få IPL direkte i øjnene under behandling.

Når det gælder de nedre regioner, kan den bruges af kvinder på brasiliansk vis, men man bør undgå at behandle anus, slimhinder og indre kønslæber. Hos mænd anbefaler vi ikke at behandle penis og pung. Området i nærheden kan behandles.

6. Undgå at bruge IPL på:

1. Øjeæblet, øjenlåg og omkring øjnene
2. Slimhinder og anus
3. Områder med akne
4. Tatoveringer
5. Øjenbryn
6. Ører
7. Brystvorter, areola
8. Inde i navlen
9. Store årer

(Bemærk: Denne liste er ikke udtømmende. Hvis du ikke er sikker på, om du kan bruge dette produkt, anbefaler vi, at du opsøger egen læge).

7. Det anbefales at udføre en test inden brug

Testmetode:

Det anbefales at udføre en hudtest 24 timer før første behandling for at tjekke mulige bivirkninger eller reaktioner. Foretag testen på et lille hudområde på indersiden af overarmen en gang med styrke 1 og en gang med styrke 5. Hvis du får rødme, brandsår, stikkende smerter eller andre symptomer i løbet af de næste 24 timer, kontakt din læge, før du bruger produktet igen.

8. Hvordan du kommer I gang med at bruge IPL-hårfjerner

Begynd IPL-behandlingen ved at barbere håret væk fra huden. Hvis du har anvendt voksning, plukning eller epilering, vent 24 timer, før du påbegynder IPL-behandlingen. Sørg for, at huden er helt tør og fri for olier og cremer. Afgiv kun én lysimpuls pr. område. Gentagne blink på samme sted er unødvendige.

Indstil intensiteten korrekt på en skala fra 1 til 9, hvor 1 er lavt, og 9 er højt.

Ved første forsøg anbefales det at starte på niveau 1. Øg gradvist styrken uge for uge, men kun hvis det ikke forårsager smerte under behandlingen.

For det bedste resultat anbefales det at dække alle ønskede behandlingsområder og placere behandlingsvinduet tæt op ad det tidligere behandlede område.

Personer med mørk hud bør udvise forsigtighed ved brug af IPL-behandling (Intense Pulsed Light). Det anbefales at undlade brug eller vælge en lavere styrke for at mindske risikoen for bivirkninger som hudirritation, rødme og hyperpigmentering. Hvis der opstår ændringer i hudens farve efter en behandling, bør du kontakte din læge.

9. Instruktioner:

1. Tilslut strømadapteren, tænd for strømforsyningen og brug sikkerhedsbrillerne, der følger med produktet. Enhedens display lyser, og displaytilstanden er på "OFF".
2. Tryk og hold tænd-knappen inde i 2 sekunder. Enheden vil starte og bekræfte gældende arbejdsstatus på displayet.
3. Tryk på funktionskontaktknappen. Når skærmen viser HR, går den i hårfjerningstilstand.
4. Maskinen har 1-9 niveauer. Tryk kort på knappen for intensitetsniveau for at justere lysbølgeintensiteten. Ved førstegangsbrug bør man starte på niveau 1.
5. Efter brug slukker du maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 2 sekunder. Hvis du ikke foretager dig noget, slukker enheden automatisk efter fem minutter.

10. Indstillinger for lyseffekt:

-Manuel tilstand (egnet til hårfjerning på små områder). Når enheden er tændt, starter den i manuel tilstand som standard. Tryk én gang på blitzknappen for at afgive et lys én gang.

-Automatisk tilstand (egner til hårfjerning på store områder). Når enheden er tændt, tryk og hold blitz-knappen inde. Enheden skifter til automatisk tilstand, og "AUTO" vil blinke på skærmen. Når du holder blitzvinduet tæt på huden, vil enheden automatisk blinke.

- IceShield-funktion: Tryk på "Funktionskontaktknappen". Et snefnug-ikon vises på skærmen, som betyder, at kølefunktionen er aktiveret.
- Hårfjerning, hudfornyelse og aknebehandling: Tryk på "Funktionskontaktknappen". Displayet vil skifte mellem HR, SC og RA.

Anbefalet behandling:

IPL bruges én gang ugentligt i 12 uger. Allerede efter 4 uger vil du mærke forskel.

Efter 12 uger vil du enten være tilfreds med resultatet og gå over i efterbehandlingsfasen, eller fortsætte - dette varierer fra person til person. Forsætter du behandlingen, gentager du den en gang ugentligt, til du opnår de ønskede resultater.

Efterbehandlingsfasen: Du vedligeholder bedst dine resultater ved at bruge IPL en gang hver anden måned efter endt behandling.

11. Soleksponering under behandling:

- Vi anbefaler at vente 48 timer, før du udsætter dig for solbadning efter behandlingen.
- Hvis du er solskoldet, eller hvis solskoldning opstår under behandlingsperioden, bør du vente, indtil det er helet, før du anvender IPL-hårfjerner. Husk altid at beskytte din hud med solcreme! Påfør SPF 50+ på de behandlede områder 48 timer efter brug og SPF 30+ i mindst to uger herefter.
- Undgå solarier i behandlingsperioden.
- Efter solbadning skal der gå to uger, før du benytter Iviskin IPL hårfjerner. Foretag derefter en test 24 timer før behandlingen påbegyndes. Se punkt 7, "Test før brug".

Ved bortskaffelse af produktet må du ikke smide det ud i restaffald. Det skal derimod returneres til en genbrugsstation. Dette er vigtigt for både miljøet og os.

12. Fejlsøgning:

Denne del indeholder de mest hyppige problemer, du kan støde på ved brug af denne enhed. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse informationer, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

<u>Beskrivelse af problem:</u>	<u>Mulige årsager:</u>	<u>Løsninger:</u>
Laderen eller enheden bliver varm under brug.	Dette er normalt.	Du behøver ikke at gøre noget.
Jeg placerer hårfjerningsmaskinen på huden og tallet blinker, men kølingsventilatoren begynder at køre.	Beskyttelse mod overophedning er blevet aktiveret.	Når beskyttelsen mod overophedning begynder, fortsætter ventilatoren med at køre. Sluk ikke for strømmen men lad enheden køle ned i 15 minutter, før du fortsætter dit brug.
Enheden blinker ikke, når blitzknappen trykkes ind.	Enheden skal nulstilles.	Nulstil enheden ved at tænde og slukke for strømmen.
Jeg kan ikke øge eller sænke intensitetsniveauet.	Enheden må nulstilles.	Nulstil enheden ved at tænde og slukke for strømmen.

<p>Det lugter dårligt, når jeg bruger enheden.</p>	<p>Tilbehør og filteret er for snavset. Vask venligst tilbehøret omhyggeligt. Håret fra behandlingsstedet er ikke fjernet godt nok. Hår kan brænde og udskille en dårlig lugt.</p>	<p>Fjern venligst håret på hudoverfladen, inden du bruger enheden.</p>
<p>Under behandlingen føles huden mere sensitiv end normalt / uudholdelig smerte, når jeg bruger enheden.</p>	<p>Lysintensiteten du har valgt er for høj.</p>	<p>Sørg for, at den rigtige lysintensitet er valgt. Sænk intensiteten om nødvendigt.</p>
	<p>Du har ikke fjernet alt håret fra behandlingsstedet.</p>	<p>Fjern venligst alt håret på behandlingsstedet, før du bruger enheden.</p>
	<p>Det ultraviolette filter ved udgangen er beskadiget.</p>	<p>Når UV-filteret er skadet, må du ikke fortsætte med at bruge enheden.</p> <p>Kontakt kundeservice.</p>
	<p>Du har brugt enheden på et forkert sted.</p>	<p>Anvend ikke enheden på følgende områder: brystvorten, areola, kønslæberne, vagina, anus samt indersiden af næseborene og ørene. Mandlige brugere bør ikke bruge produktet i ansigtet eller på pungen.</p>

	Enheden passer ikke til din hudtype.	Hvis hudtypen er brun-sort eller meget mørk, anbefales du ikke at bruge denne enhed.
Huden reagerede længere tid end normalt efter endt behandling.	Lysintensiteten du har valgt er for høj.	Vælg venligst en lavere lysintensitet næste gang.
	Lysintensiteten du har valgt er for lav.	Vælg venligst en højere lysintensitet næste gang.
	Enheden har ingen effekt på din hårfarve.	Du må fjerne alt håret. Det anbefales, at du følger den anbefalede behandlingsprocedure.
	Din krop responderer langsomt på IPL-behandling.	Fortsæt med at bruge enheden i mindst seks måneder. I denne periode vil håret vokse ud igen men i mindre grad.

Hvis du undrer dig over noget eller har spørgsmål, er du velkommen til at tjekke vores blog på www.iviskin.dk/blog eller FAQ med ofte stillede spørgsmål, som du finder på vores hjemmeside. Kundeservice står også klar til at besvare dine spørgsmål på chat, telefon eller mail.

SÅDAN BRUGER DU IVISKIN IPL-HÅRFJERNER

M E D 6 E N K L E T R I N !

1



1. Læs brugervejledningen grundigt før brug.

2



2. Barber behandlingsområdet og tør det grundigt.

3



3. Tænd for enheden og vælg den rigtige styrke.

4



4. Placer lysvinduet helt mod huden og start behandlingen!

5



5. Lad enheden køle af, før du rengør lysvinduet med en klud.

6



6. Påfør rigeligt med bodylotion på behandlingsområdet