



ISQOOM®
Instrukcja obsługi





Informacje w skrócie	4
Sposób użytkowania	6
Gama serum xCential	8
Programy xCential	10
Konserwacja i przechowywanie	16
Informacje techniczne	18
Ważne wskazówki	19

Bardzo dziękujemy za podjęcie decyzji o zakupie SQOOM. Ten wysokiej jakości koncept, opracowany przez firmę SQOOM Global AB - eksperta w dziedzinie medycyny i dermatologii, oferuje wyjątkowo skuteczne formuły serum oraz specjalne programy przeciwdziałające starzeniu się skóry, w tym redukujący przebarwienia i dogłębnie oczyszczający. Urządzenie przeznaczone jest również do stosowania na skórze z problemami dermatologicznymi.

SQOOM to skuteczny sposób aby osiągnąć widocznie piękną skórę dzięki wygodnemu urządzeniu do profesjonalnej pielęgnacji w warunkach domowych.

Rewolucyjny koncept SQOOM zawiera opatentowaną technologię synchroniczną – połączenie sonoforezy (ultradźwięków) i jonoforezy. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby uzyskać optymalne rezultaty z użytkowania SQOOM i osiągnąć maksymalny sukces pielęgnacyjny.



- 1 | Głowica przewodząca ze stopu tytanu – odpowiednia również dla osób cierpiących z powodu alergii
Na głowicę nakładaj serum w ilości, która ją całą pokryje.
- 2 | Diody kontrolne
Migające rytmicznie diody kontrolne na urządzeniu sygnalizują, że jest ono aktywne (tylko gdy jest w kontakcie ze skórą).
- 3 | Przycisk POWER - włącznik/wyłącznik
Urządzenie włącza się i wyłącza poprzez pojedyncze naciśnięcie przycisku POWER.
- 4 | Przycisk STEP – guzik wyboru programu
Każde naciśnięcie przycisku STEP inicjuje włączenie jednego z programów.
- 5 | Powierzchnie (miejsca) kontaktowe
Zawsze trzymaj SQOOM w taki sposób, aby dotykać dłońią metalicznych powierzchni (miejsc) kontaktowych po obu stronach urządzenia.
- 6 | Ładowarka z funkcją stacji ładującej
Po każdym użyciu urządzenia umieść je ponownie w stacji ładowania, aby SQOOM był gotowy do działania w każdej chwili.
- 7 | Dioda kontrolna baterii
Kiedy dioda kontrolna świeci się na zielono, to oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane. Kiedy dioda świeci się na niebiesko, to oznacza, że proces ładowania jest w toku.


Używając urządzenia SQOOM korzystaj tylko z oryginalnego serum xCential, które jest dostosowane do synchronicznej technologii urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za efekty przy użyciu kosmetyków lub urządzeń produkowanych przez innych producentów.




Przed każdym zabiegiem oczyść swoją skórę tak jak zazwyczaj. Następnie nałóż na głowicę wybrane serum z aktywnymi składnikami w ilości, która ją całą pokryje (1) Serum można również nałożyć bezpośrednio na skórę poddawaną zabiegowi. Włącz urządzenie (2).

Teraz wybierz odpowiedni program (3). Trzymaj SQOOM w taki sposób, aby po obu stronach dotykać dłońią powierzchni (miejsc) kontaktowych (4). Następnie przyłóż głowicę do tej partii skóry, na której chcesz wykonać zabieg i delikatnie przesuwaj ją po skórze powolnymi okrężnymi ruchami (5).

WAŻNA INFORMACJA: jeśli wykonujesz zabieg SQOOM u innej osoby, pamiętaj, że Twoja wolna ręka musi dotykać jej skóry. W ten sposób zamkniesz obieg, pozwalając SQOOM działać niezawodnie. (działanie sygnalizuje migająca dioda kontrolna) (6).

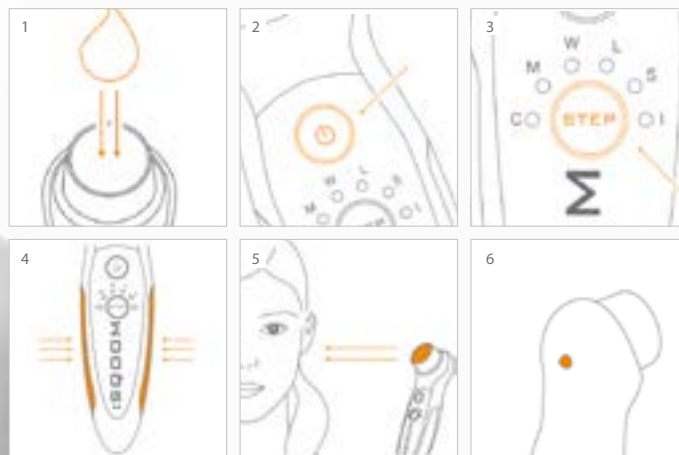

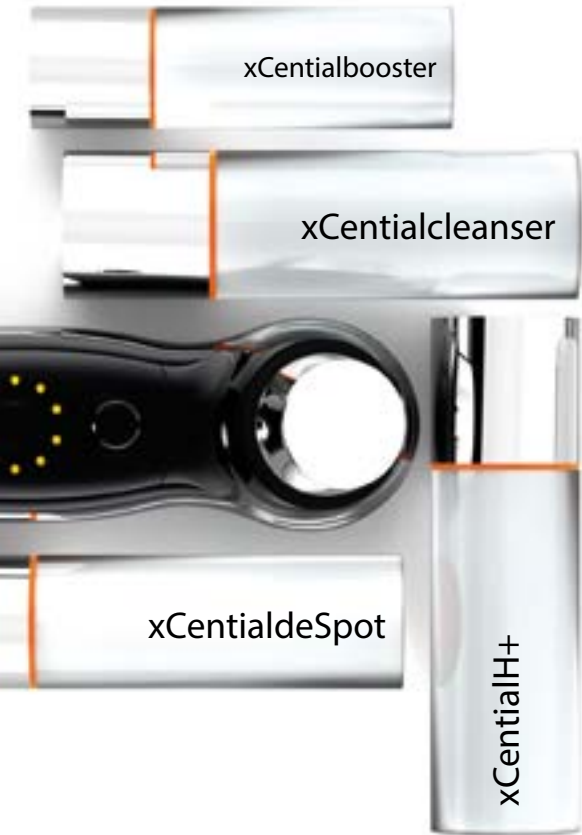

Używając urządzenia SQOOM korzystaj tylko z oryginalnego serum xCential, które jest dostosowane do synchronicznej technologii urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za efekty przy użyciu kosmetyków lub urządzeń produkowanych przez innych producentów.

xCential cleanser
Serum oczyszczające

Serum oczyszczające to interaktywny proces fizycznego, dokładnego oczyszczania porów skóry zapewniający jej jednocześnie dogłębne nawilżenie. Przygotowuje skórę do zabiegu SQOOM.

Panthenol oraz ekstrakt z rumianku zawarte w serum działają na skórę kojąco, łagodząco i relaksująco. Serum można stosować na skórę z problemami.

xCential H+
Innowacyjne serum o działaniu rewitalizującym

Innowacyjne serum H+ opracowane zostało wyłącznie na bazie przyjaznych dla skóry, aktywnych składników naturalnego pochodzenia. Dzięki temu zapewnia efekt wyraźnie piękniejszej i wygładzonej skóry.

Głównym składnikiem serum H+ jest kwas hialuronowy – znana substancja nawilżająca. Jego drobnocząsteczkowa budowa zapewnia penetrację maleńkich molekuł do głębszych warstw skóry, gdzie wypełniają one puste przestrzenie powstałe na skutek procesu starzenia.

xCential deSpot
Serum redukujące przebarwienia

Serum wybielające zawiera unikalną kompozycję aktywnych składników: sulforafan i genisteinę, które rozjaśniają skórę oraz redukują przebarwienia i plamy pigmentacyjne związane z wiekiem.

xCential booster
Liftingujące serum nawilżające o natychmiastowym działaniu

Skoncentrowany zastrzyk nawilżenia, aktywny przez 24-godziny od aplikacji. Efekt to świeża, aksamitna i momentalnie wygładzona skóra. Już pojedyncza aplikacja serum w widoczny sposób redukuje głębokość zmarszczek, a efekt wygładzonej skóry utrzymuje się przez 8 godzin. Serum jest idealne pod makijaż.

xCentialcleanser

- Oczyszć skórę tak jak zazwyczaj (usuń makijaż, kremy i perfumy).
- Nałóż taką ilość serum xCential cleanser, by pokryło całą głowicę urządzenia lub tę partię skóry, którą zamierzasz poddać zabiegowi.
- Włącz urządzenie przyciskiem POWER i wybierz przyciskiem STEP program C lub program I (dioda podświetlona na niebiesko), dedykowany do wrażliwych okolic oczu.
- Trzymaj SQOOM w taki sposób, by po obu jego stronach dotykać dłonią powierzchnię (miejsc kontaktowych).
- Przyłóż głowicę do tej partii skóry, którą chcesz poddać zabiegowi i przesuwaj głowicę po skórze delikatnymi, powolnymi, okrężnymi ruchami.
- Po zabiegu oczyszczającym umyj twarz dużą ilością wody.
- Efekt: Pory skóry dogłębnie oczyszczone.



PROGRAM 1 | C

Głębokie oczyszczanie porów



PROGRAM 6 | I niebieski

Dedykowany specjalnie do oczyszczania okolic oczu



Czas trwania zabiegu: 4 minuty

Zastosowanie:

raz w tygodniu

Aby uzyskać szybsze rezultaty stosuj codziennie.

xCentialH+


- Zalecamy, aby przed każdym zabiegom z serum xCential H+ przeprowadzić zabieg oczyszczający (program C).
- Nałóż odpowiednią ilość serum xCential H+ na głowicę lub bezpośrednio na obszar skóry, który chcesz poddać zabiegowi.
- Włącz urządzenie przyciskiem POWER i wybierz przyciskiem STEP program W lub program I (dioda podświetlona na zielono), dedykowany do wrażliwych okolic oczu.
- Trzymaj SQOOM w taki sposób, by po obu jego stronach dotykać dłonią powierzchnię (miejsc kontaktowych).
- Przyłóż głowicę do tej partii skóry, którą chcesz poddać zabiegowi i przesuwaj po skórze powolnymi, delikatnymi, okrężnymi ruchami.
- Gdy zabieg przeprowadzany jest wieczorem, zalecamy pozostawić serum na skórze na całą noc w postaci maski. Jeśli natomiast zabieg przeprowadzany jest rano lub w ciągu dnia, zalecamy zmyć dokładnie serum po jego zakończeniu.
- Efekt: Wyraźnie piękniejsza skóra.



Wskazówka: Serum H+ można stosować również z programem M (masaż) oraz L (Lifting), jako uzupełnienie programu W (przeciwzmarszczkowy).

PROGRAM 3 | W

Redukowanie zmarszczek i ujędrnianie skóry

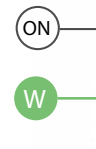

PROGRAM 6 | I zielony

Dedykowany specjalnie do pielęgnacji okolic oczu



Czas trwania zabiegu:

8-12 minut

Zastosowanie:

raz w tygodniu

Aby uzyskać szybsze rezultaty stosuj codziennie


xCentialdeSpot

- Zalecamy, aby przed każdym zabiegiem z serum deSpot przeprowadzić program oczyszczający.
- Nałóż taką ilość serum, aby pokryło całą głowicę lub tę partię skóry, którą zamierzasz poddać zabiegowi.
- Włącz urządzenie przyciskiem POWER i wybierz przyciskiem STEP program W lub program I (dioda podświetlona na zielono), dedykowany do wrażliwych okolic oczu.
- Trzymaj SQQOOM w taki sposób, by po obu jego stronach dotykać dłonią powierzchni (miejsz) kontaktowych.
- Przyłóż głowicę do tej partii skóry, którą chcesz poddać zabiegowi i przesuwaj głowicę po skórze delikatnymi, powolnymi, okrężnymi ruchami.
- Gdy zabieg przeprowadzany jest wieczorem, zalecamy pozostawić serum na skórze na całą noc w postaci maski. Jeśli natomiast przeprowadzany jest rano lub w ciągu dnia, zalecamy zmyć dokładnie serum po jego zakończeniu.
- Efekt: rozjaśnienie przebarwień i plam pigmentacyjnych związanych z wiekiem.



PROGRAM 3 | W

Zabieg rozjaśniający

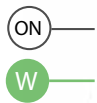

PROGRAM 6 | I zielony

Dedykowany specjalnie do pielęgnacji okolic oczu



Czas trwania zabiegu: 8-12 minut

Zastosowanie: raz w tygodniu
Aby uzyskać szybsze rezultaty stosuj codziennie.

xCentialbooster

- Nałóż serum booster na głowicę lub bezpośrednio na skórę, którą zamierzasz poddać zabiegowi.
- Włącz urządzenie przyciskiem POWER i wybierz przyciskiem STEP program S.
- Trzymaj SQQOOM w taki sposób, by po obu jego stronach dotykać dłonią powierzchni (miejsz) kontaktowych.
- Przyłóż głowicę tam, gdzie chcesz przeprowadzić zabieg i przesuwaj po skórze powolnymi, delikatnymi, okrężnymi ruchami.
- Po zakończeniu zabiegu pozostałe na skórze serum wmasuj w nią opuszkami palców.
- Efekt: serum nadaje skórze młodzieńczy i promienny wygląd.



PROGRAM 5 | S

Skoncentrowany zastrzyk nawilżenia zapewniający 24-godzinny efekt



Czas trwania zabiegu: 4 minuty

Zastosowanie: w zależności od potrzeb – zapewnia natychmiastowy efekt – doskonale na specjalne okazje oraz jako idealne dopełnienie kuracji przeciwzmarszczkowej serum xCential H+.



Instrukcje dotyczące konserwacji i ładowania

Aby czerpać z urządzenia maksymalne zadowolenie, prosimy o zapoznanie się z następującymi wskazówkami.

Używając urządzenia SQOOM korzystaj tylko z oryginalnego serum xCential, które jest dostosowane do synchronicznej technologii urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za efekty przy użyciu kosmetyków lub urządzeń produkowanych przez innych producentów.



Przedłużona międzynarodowa gwarancja

Prosimy o zarejestrowanie urządzenia w celu uzyskania BEZPŁATNEJ, przedłużonej, pełnej gwarancji i przyłączenia się do grupy VIP SQOOM. Przedłużając wymaganą przez prawo gwarancję, możesz bezpłatnie korzystać z rozszerzonej, międzynarodowej, pełnej gwarancji SQOOM oraz otrzymać wiele innych korzyści.

Rejestracja trzeba dokonać na stronie internetowej producenta:

www.warranty.sqoom.com

Rejestracja musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.

Customer service: info@SQOOM.com

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu i nie zanurzaj go w wodzie.
- Czyść głowicę wilgotną ściereczką.
- Po wyłączeniu urządzenia umieszczaj je w stacji ładującej, upewniając się, czy świeci się niebieska dioda LED.
- Kiedy ładowanie dobiegnie końca, niebieska dioda zmieni kolor na zielony. Jeśli wystąpią problemy z ładowaniem, wówczas dioda będzie migać na niebiesko.
- Kiedy bateria urządzenia ulegnie pełnemu wyczerpaniu, prosimy o ładowanie jej przynajmniej przez 3 godziny, zanim urządzenie będzie ponownie używane.
- Kiedy urządzenie jest w pełni naładowane, czas jego użytkowania to ok. 4 godziny. Jedno pełne naładowanie umożliwi używanie urządzenia ponad 2 tygodnie przez 12 minut dziennie.
- Naciśnij przycisk STEP przez ok. 3 sekundy, aby wyświetlił się poziom naładowania baterii. Jeśli świecą się diody LED wszystkich sześciu programów, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane. Jeśli świecą się tylko dwie diody, to oznacza poziom naładowania na 30 minut użytkowania. Kiedy rozlegnie się sygnał dźwiękowy, bateria musi zostać ponownie naładowana.
- Jeśli nie rozpoczniesz zabiegu urządzeniem w ciągu dwóch minut od jego włączenia, wówczas wyłączy się ono automatycznie.
- Zaprogramowany czas działania każdego z programów to 4 minuty. Kiedy 4 minuty dobiegną końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po tym czasie urządzenie przełączy się na tryb czuwania. Jeśli nie zostanie ponownie włączone w ciągu 2 minut, wówczas automatycznie się wyłączy.
- Wejściowe napięcie znamionowe: 100 V - 240 V AC. W związku z tym urządzenie może być zabierane w podróż i używane na całym świecie.
- Kiedy urządzenie zostanie w pełni naładowane, wyjmij wtyczkę ładowarki z kontaktu.
- Utrzymuj wszystkie wtyczki elektryczne w czystości, wolne od kurzu i suche.

Oznaczenie urządzenia

Urządzenie	SQOOM m2
Ładowarka z funkcją stacji dokującej	
Napięcie sieciowe	AC 100 - 240V, 50/60 Hz
Wyjście/Adapter	DC 4.2 V, 1A
Moc	7 W
Waga	133 g
Urządzenie przenośne	
Bateria litowo/jonowa	
Wyjście/ Adapter	DC 3,7V / 2200mA
Waga	194 g (brutto)
Ultradźwięki	
Częstotliwość	1 MHz
Poziomy intensywności	od 0.1 W/ cm ² do 0.5 W/ cm ²
Jonoforeza	
Częstotliwość	1,150Hz ~ 1,785Hz



Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Kiedy produkt nie nadaje się do dalszego użytkowania, należy oddać go do punktów zbiórki odpadów elektronicznych.

Zabiegi SQOOM wykonuj wyłącznie przy użyciu oryginalnych urządzeń SQOOM w połączeniu z oryginalnym serum z linii xCential. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty, gdy wykorzystywane będą kosmetyki lub urządzenia innych producentów.

Nie poddawaj zabiegowi jednej partii skóry dłużej niż 20 minut dziennie.

Nie stosuj SQOOM na skórze ze zmianami nowotworowymi oraz na miejsca poddane działaniom chirurgicznym.

Nie stosuj SQOOM, jeśli masz rozrusznik serca.

W przypadku nadczynności tarczycy nie używaj SQOOM w okolicy gardła lub klatki piersiowej.

Nie stosuj SQOOM wokół implantów stawowych. Jego działanie może zwiększyć dolegliwości bólowe.

Podczas ciąży nie stosuj SQOOM w okolicy brzucha i biustu.

Unikaj kontaktu serum i głowicy z powierzchnią gałek ocznych, powiekami i błonami śluzowymi.

Przechowuj urządzenie i serum poza zasięgiem dzieci.

Nie przechowuj serum w temperaturze wyższej niż 25°C.

Formuły serum przeznaczone są wyłącznie do użytku zewnętrznego, do aplikacji na powierzchnię skóry.

Jeśli wykonujesz zabieg SQOOM innej osobie, pamiętaj, że Twoja wolna ręka musi dotykać jej skóry. W ten sposób zamkniesz obieg, pozwalając SQOOM działać niezawodnie.

© Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz SQOOM Global AB. Jakikolwiek kopiowanie lub edycja przekraczająca ramy prawa autorskiego są niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody.

SQOOM Global AB
Stockholm/ Sweden



Zastrzeżony znak towarowy SQOOM Global AB

SQOOM Global AB
Office/Warehouse
Åkersbärsvägen 14
611 38 Nyköping
Sweden
+46 852 504 720
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com