

Bubble Sweden

- Site: www.bubblesweden.se
- Facebook: [Bubblansweden](https://www.facebook.com/Bubblansweden)
- Instagram: [Bubblesweden.se](https://www.instagram.com/Bubblesweden.se)
- YouTube: [BubbleSweden](https://www.youtube.com/BubbleSweden)
- Email: info@bubblesweden.se
- DiaBox app: [Facebook DiaBox](https://www.facebook.com/DiaBox)
- GitHub: [BubbleDevTeam](https://github.com/BubbleDevTeam)



Produit : Bubble CGM

8 Mars, 2020


Détails du produit.

Imperméable et rechargeable Compatible avec toutes les principales applications. Une charge complète vous durera 14 jours. Léger et ultra-mince Tout en un gadget pour des lectures de glucose cohérentes et précises Autocollant médical approuvé, sans danger pour les peaux sensibles. Informations fournies en un clic.

- NFC 15693 Compatible avec tous les capteurs Libre
- Bluetooth 5.0 compatible avec Android et iOS.
- 40 * 29 * 6.8 / 6g Designs rationalisés Batterie 80 mah 5000 Lectures par charge.
- Réinitialisation automatique dès la mise sous / hors tension avec l'aimant du connecteur de charge , ou celui de la boîte.
- Protection contre les allergies par Velcro élastique en mode fixe adhésif / bande
- Il peut détecter et lire Libre 1, Libre 2, Libre Pro / H, la version Libre US 10 jours, US 14 jours
- Android 4.4 et supérieur, iOS 8.0 et supérieur
- Pour Libre1, il peut lire 5000 fois avec un capteur de travail
- Protection IP67 contre les intrusions d'eau, cela signifie qu'il peut être immergé dans l'eau douce jusqu'à une profondeur maximale d'un mètre pendant 30 minutes au maximum.



Ce produit peut être livré partout dans le monde.

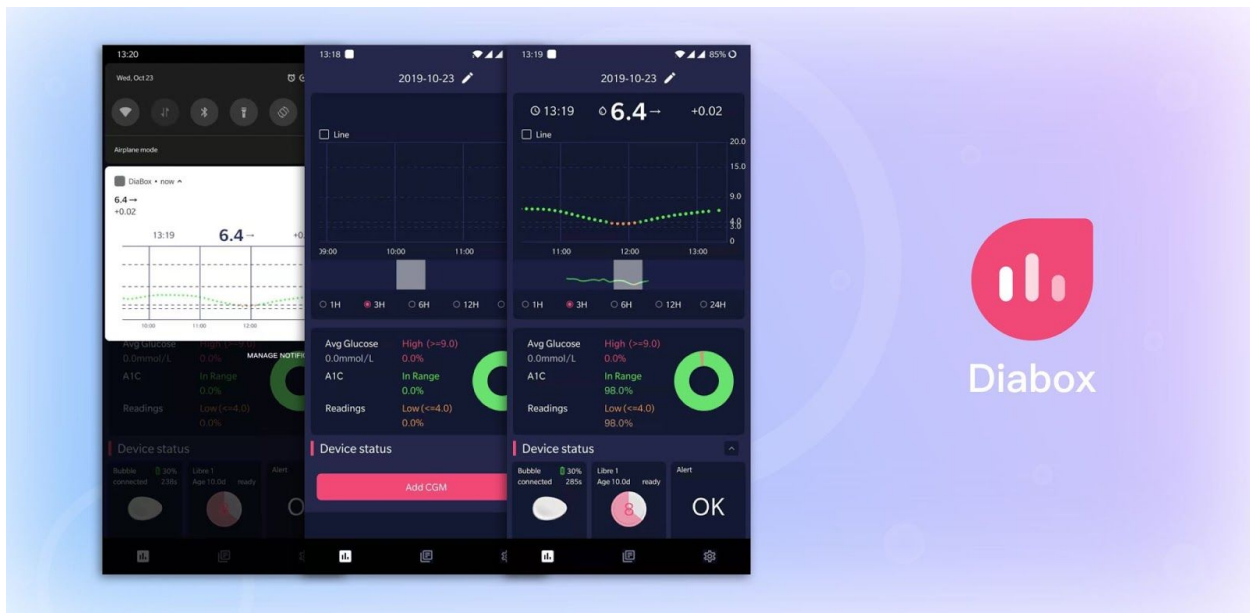

Bubble Information, Capteur

Pour FreeStyle Libre.

Bubble fonctionne avec tous les types de capteurs FreeStyle Libre, il fonctionne avec le capteur FreeStyle Libre US 14 jours disponible aux États-Unis, FreeStyle Libre 2 en Allemagne et en Norvège, FreeStyle Libre Pro aux États-Unis et dans quelques pays d'Asie et FreeStyle Capteurs libres.

Les parents d'un jeune enfant qui utilise n'importe quel capteur FreeStyle Libre peuvent utiliser cette nouvelle bulle pour voir ses lectures de glucose sur l'application Diabox / Xdrip + lorsque l'enfant est absent.

Les utilisateurs peuvent voir les mises à jour de lecture du glucose toutes les 5 minutes sur Android, iPhone et montres connectées (Apple et Android) et ils peuvent recevoir des notifications et des alarmes sur leur montre ou leur téléphone.

Avant de commencer avec Diabox et Bubble.

Assurez-vous que votre Bubble est complètement chargé.

Vous verrez une lumière bleue fixe de la bulle lorsqu'elle sera chargée à 100%.

Voyant rouge clignotant = en charge.



Téléchargement Diabox.

Android

[DiaBox -Google Play store](#)

iOS

[DiaBox - TestFlight](#)




To join the DiaBox beta, tap the link on your iPhone or iPad after you install TestFlight.

Connectez-vous à votre Bubble.



Connectez-vous à votre Bubble.

Fixez votre bulle au-dessus du capteur Libre et lancez l'application Diabox.

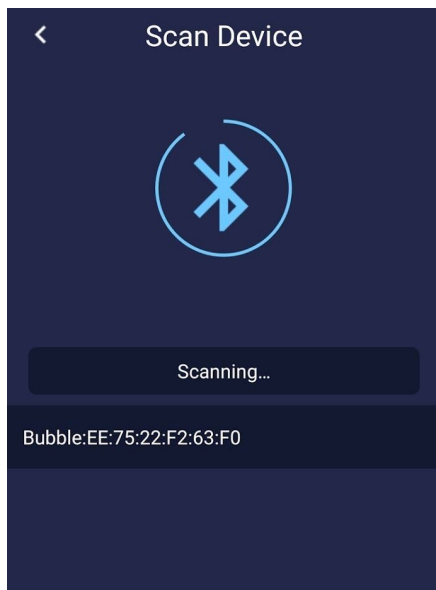


Ouvrez la page des paramètres et appuyez sur le bouton «Libre» pour rechercher Bubble.

"Connexion à votre appareil"

Dans les 5 minutes, vous obtiendrez vos premières lectures de glucose envoyées de la bulle à votre appareil.

Configurer les alarmes.

Dans le menu Paramètres, vous pouvez configurer vos alarmes, changer de langue et également utiliser votre appareil et aussi en mode suiveur.

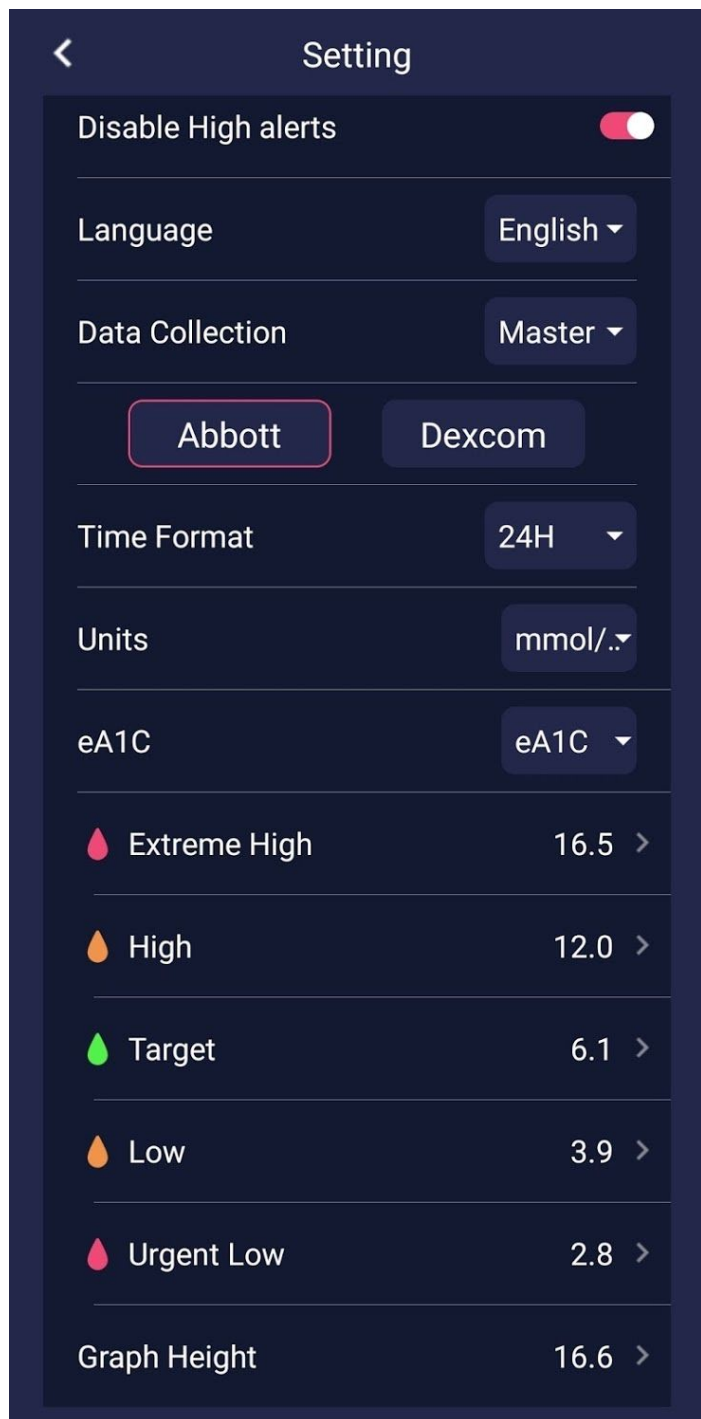

Configuration du suiveur, intégration de Nightscout.

Activez le téléchargement du serveur de partage Nightscout.

URL -

<https://yourherokusite.herokuapp.com/>

Utilisez l'url de votre application Heroku dans ce champ

key -


Utilisez votre clé secrète APi dans ce champ..

Save.

Test Connexion.

Internal Http Servers.

Activez-le pour Android APPS, Pebble Watch, Garmin et Nightguard Intégration.

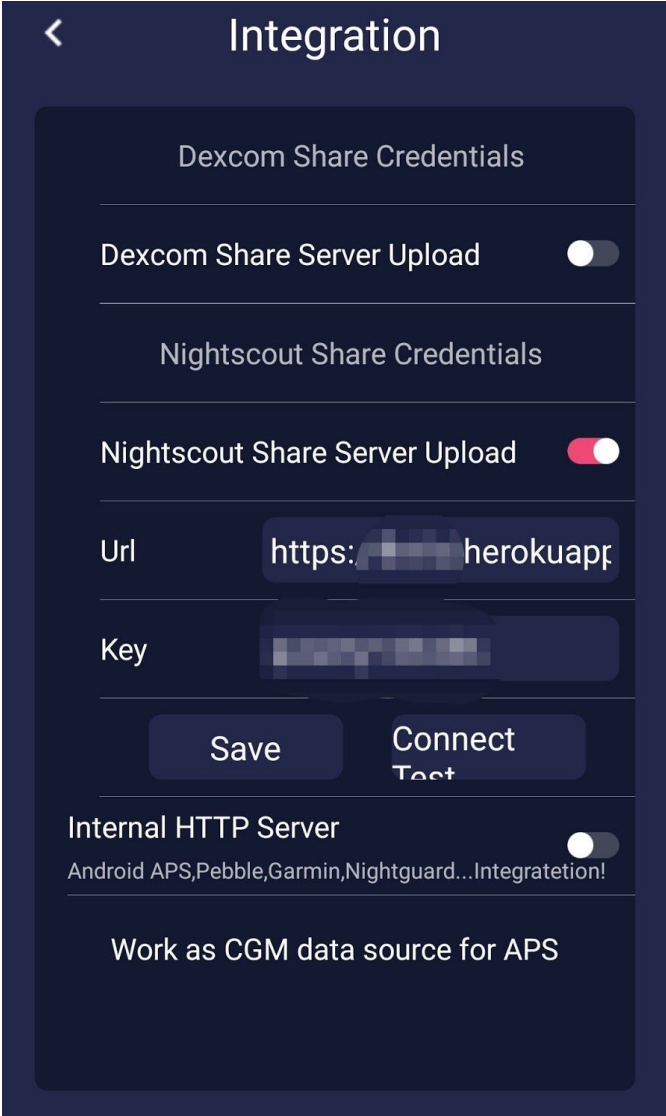

Integration

Dexcom Share Credentials

Dexcom Share Server Upload

Nightscout Share Credentials

Nightscout Share Server Upload

Url

Key


Save Connect Test

Internal HTTP Server
Android APS,Pebble,Garmin,Nightguard...Integratetion!

Work as CGM data source for APS

Comment réinitialiser votre Bubble

Glissez un aimant sur le dessus de la bulle jusqu'à ce qu'une lumière rouge clignote une fois.

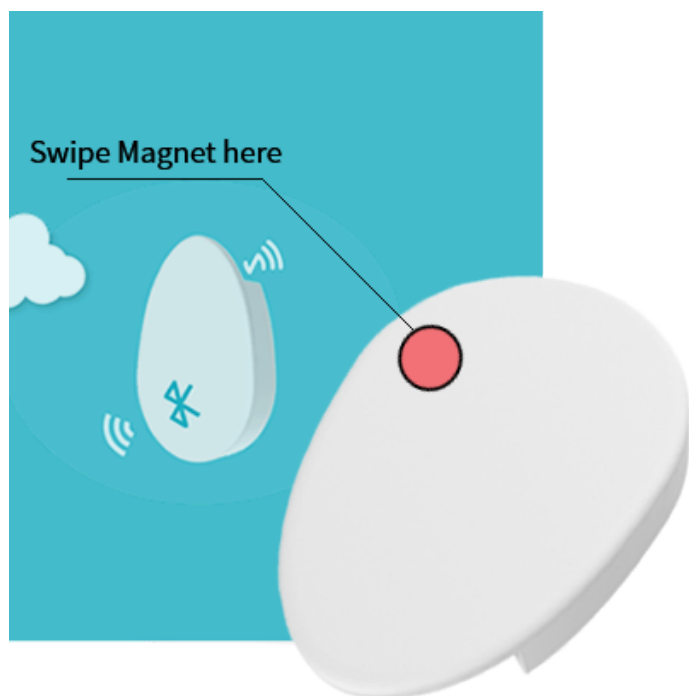

Liens

- **Site:** www.bubblesweden.se
- **Facebook:** [Bubblansweden](#)
- **Instagram:** [Bubblesweden.se](#)
- **YouTube:** [BubbleSweden](#)
- **Email:** info@bubblesweden.se
- **DiaBox app:** [Facebook DiaBox](#)
- **GitHub:** [BubbleDevTeam](#)