



Invacare[®] | **Dacapo**

Flexibilitet & komfort



Invacare **Dacapo** är ett brett sortiment av madrasser designade för att uppfylla kundernas behov inom hemsjukvård och på sjukhus. De är uppbyggda av höglastiskt, miljövänligt skum med hög densitet, alternativt viscoelastiskt skum inom segmenten standard, komfort och tryckavlastning. **Dacapo** har utvecklats för att erbjuda optimal liggkomfort samt tryckavlastning utan kompromiss gällande hygien och användarvänlighet.

Invacare **Dacapo Standard**

Dacapo Standard är en basmadrass som uppfyller de grundläggande kraven för en god liggkomfort. Madrassen består av höglastiskt skum med god bärighet.

Brandtestad enligt Europeisk standard SS EN 597:1

Dacapo Standard överdrag

- 100% bomull
- Maskintvätt 40 grader



10 cm Höglastiskt skum
Densitet 38kg/m³
Intryckshårdhet 140N



Blixtlås

Blixtlås på tre sidor


Invacare **Dacapo Basic**

Dacapo Basic är en basmadrass utrustad med hygienöverdrag som väl uppfyller de grundläggande kraven på liggkomfort och med hög hygienisk standard. Det höglastiska miljövänliga skummet erbjuder ett stöttande underlag med stor följsamhet och hållbarhet.

Brandtestad enligt Europeiskt standard SS EN 597:1 & 2

Dacapo Basic Överdrag


- 100% vätsketätt
- Polyuretan med polyester
- Luftgenomsläppligt/ ångandas
- Töjbart i två riktningar
- Maskintvätt 95 grader

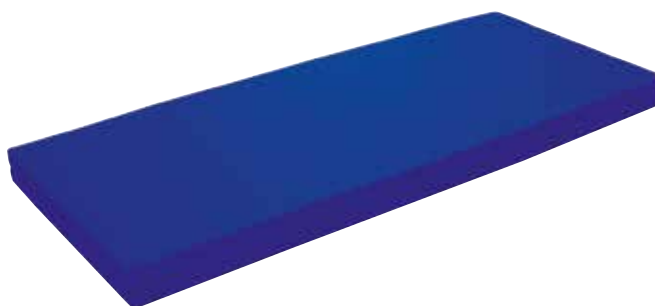

12 cm Höglastiskt skum
Densitet 38kg/m³
Intryckshårdhet 140N



Enkel att hantera

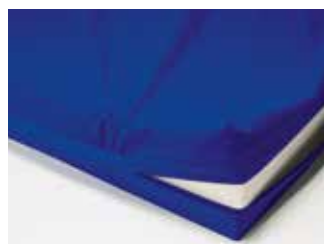

Blixtlås

Diskret dragkedja på tre sidor försedd med överlappande droppkant.

Invacare **Dacapo Heavy User Light**

Dacapo Heavy User Light är uppbyggd för att möta tyngre brukares behov och erbjuder ett fast, komfortabelt stöttande underlag. Madrassen är uppbyggd av tre skikt. Det undre skiktet består av högelastiskt skum som upprätthåller madrassens stabilitet. Det mittersta skiktet även det av högelastiskt skum fast något mjukare. Det övre skiktet är av viscoelastiskt skum som ger extra god tryckavlastning och komfort. Brandtestad enligt Europeiskt standard SS EN 597:1 & 2




Dacapo Heavy User Light Överdrag

- 100% vätsketätt
- Polyuretan med polyester
- Luftgenomsläppligt/ ångandas
- Töjbart i två riktningar
- Maskintvätt 95 grader



Enkel att hantera

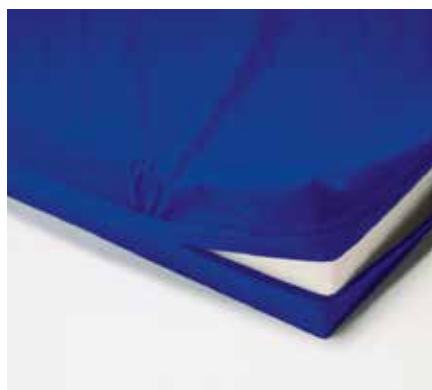

Blixtlås

Diskret dragkedja på tre sidor försedd med överlappande droppkant.



Heavy User light

Max brukarvikt 250 kg

Övre skikt (5cm) Viscoelastiskt skum densitet 50kg/m³ intryckshårdhet 100N

Mellanskikt (5cm) Högelastiskt skum densitet 38kg/m³ intryckshårdhet 140N

Undre skikt (5cm) Högelastiskt skum densitet 50kg/m³ intryckshårdhet 200N

Heavy User

Max brukarvikt 350kg


Övre skikt (5cm) Viscoelastiskt skum densitet 50kg/m³ intryckshårdhet 100N

Mellanskikt (5cm) Högelastiskt skum densitet 38kg/m³ intryckshårdhet 140N

Undre skikt (5cm) Högelastiskt skum densitet 50kg/m³ intryckshårdhet 200N

Invacare **Dacapo Comfort**

Dacapo Comfort är en komfortmadrass som väl uppfyller de grundläggande kraven för en god liggkomfort. Det höglastiska miljöskummets volymvikt ger en ökad möjlighet för en god återhämtning samtidigt som madrassens unika öppna cellstruktur tillåter kroppen att andas. Madrassen är skuren i olika stora fyrkanter som är individuellt flexibla. Denna profilering gör det möjligt för kroppens konturer att sjunka ner i materialet så att optimal liggkomfort uppnås. Brandtestad enligt Europeiskt standard SS EN 597:1 & 2

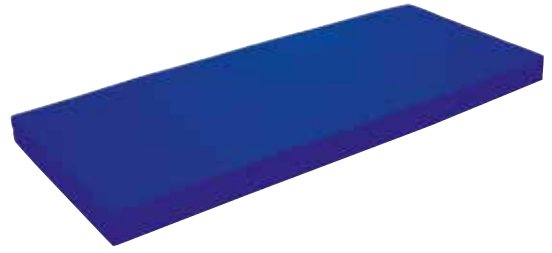

Dacapo Comfort Överdrag

- 100% vätsketätt
- Polyuretan med polyester
- Luftgenomsläppligt/ ångandas
- Töjbart i två riktningar
- Maskintvätt 95 grader



12 cm Höglastiskt miljöskum
Densitet 53kg/m³
Intryckshårdhet 145N



Enkel att hantera




Blixtlås

Diskret dragkedja på tre sidor försedd med överlappande droppkant.

Invacare **Dacapo Comfort Plus**

Dacapo Comfort Plus är en trycksårspåbyggande madrass som understödjer behandling av trycksår kategori 1-2. Det höglastiska miljöskummets volymvikt ger en ökad möjlighet för en god återhämtning samtidigt som madrassens unika öppna cellstruktur tillåter kroppen att andas. Madrassen är skuren i olika stora fyrkanter som är individuellt flexibla. Denna profilering gör det möjligt för kroppens konturer att sjunka ner i materialet så att optimal liggkomfort uppnås. Brandtestad enligt Europeiskt standard SS EN 597:1 & 2

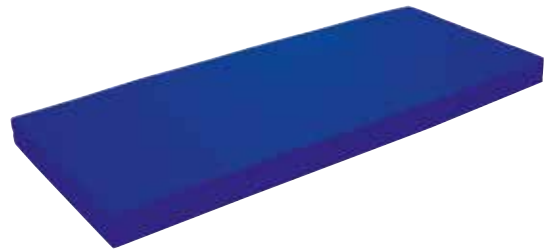

Dacapo Comfort Plus Överdrag

- 100% vätsketätt
- Polyuretan med polyester
- Luftgenomsläppligt/ ångandas
- Töjbart i två riktningar
- Maskintvätt 95 grader



14 cm Höglastiskt miljöskum
Densitet 53kg/m³
Intryckshårdhet 145N



Enkel att hantera



Blixtlås

Diskret dragkedja på tre sidor försedd med överlappande droppkant.

Invacare **Dacapo Child**


Dacapo Child är en enskikts madrass uppbyggd av ett höglastiskt miljövänligt skum. Madrassen är designad för lättare, yngre brukare och tillåter kroppens konturer att sjunka ner. Madrassens volymvikt ger en ökad möjlighet för god återhämtning.

Brandtestad enligt Europeiskt standard SS EN 597:1 & 2

Dacapo Child Överdrag

- 100% vätsketätt
- Polyuretan med polyester
- Luftgenomsläppligt/ ångandas
- Töjbart i två riktningar
- Maskintvätt 95 grader

Finns även med bomullsöverdrag

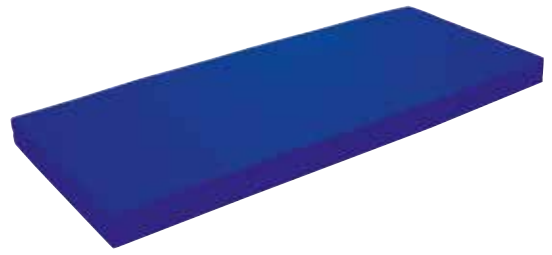

8 cm Höglastiskt
miljöskum
Densitet 50kg/m³
Intryckshårdhet 145N



Enkel att hantera



Blixtlås


Diskret dragkedja på
tre sidor försedd med
överlappande droppkant.

Invacare **Dacapo Combi**

Dacapo Combi - är en kombinationsmadrass med goda tryckavlastande egenskaper. Det övre skiktet är tillverkat i ett trög/viscoelastiskt skum som formar sig efter brukarens kroppstemperatur, konturer och rörelser. Skummet tillåter brukaren att sjunka ner i materialet så att trycket fördelar sig på en större yta. Den öppna cellstrukturen minimerar utvecklingen av värme och fukt. Det undre skiktet av höglastiskt skum upprätthåller madrassens stabilitet. Brandtestad enligt Europeiskt standard SS EN 597:1 & 2

Dacapo Combi Överdrag

- 100% vätsketätt
- Polyuretan med polyester
- Luftgenomsläppligt/ ångandas
- Töjbart i två riktningar
- Maskintvätt 95 grader

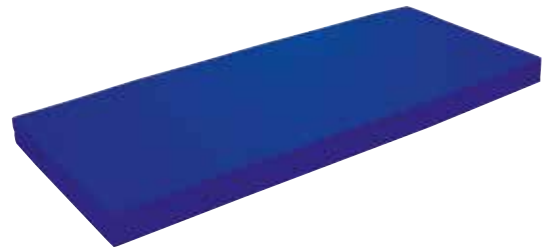

Övre skikt 6 cm

Viscoelastiskt skum
Densitet 50kg/m³
Intryckshårdhet 100N

Undre skikt 8 cm

Höglastiskt miljöskum
Densitet 38kg/m³
Intryckshårdhet 140N



Enkel att hantera




Blixtlås

Diskret dragkedja på
tre sidor försedd med
överlappande droppkant.

Invacare **Dacapo Top**

Dacapo Top – är en tryckavlastande bäddmadrass som med fördel kan kombineras med en basmadrass. **Dacapo Top** formar sig efter brukarens kroppstemperatur, konturer och rörelser. Skummet tillåter brukaren att sjunka ner i materialet så att trycket fördelar sig på en större yta. Den öppna cellstrukturen minimerar utvecklingen av värme och fukt. Brandtestad enligt Europeiskt standard SS EN 597:1 & 2

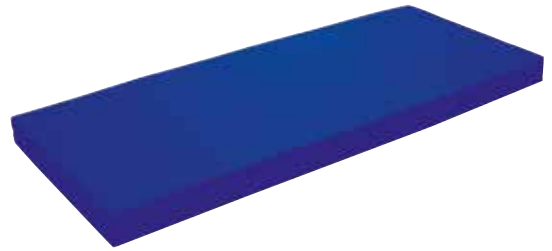

Dacapo Top Överdrag

- 100% vätsketätt
- Polyuretan med polyester
- Luftgenomsläppligt/ ångandas
- Töjbart i två riktningar
- Maskintvätt 95 grader



7 cm

Viscoelastiskt skum
Densitet 50kg/m³
Intryckshårdhet 100N



Blixtlås

Diskret dragkedja på tre sidor försedd med överlappande droppkant.

Överdrag

Hygienöverdrag

Hygienöverdraget är en kombination av polyuretan och polyester. Överdraget är töjbart i två riktningar och följsamt mot kroppen. Materialet är luftgenomsläppligt och ångandas. Överdraget är allergitestat och behandlat mot dammkvalster

Hygienöverdrag med evakueringsfunktion

Evakueringsöverdraget är en kombination av polyuretan och polyester. Överdraget är töjbart i två riktningar och följsamt mot kroppen. Materialet är luftgenomsläppligt och ångandas. Överdraget är utrustat med handtag på alla fyra sidorna. På överdragets långsidor finns säkerhetsremmar som vid nödläge sveps över brukaren för säker fastsättning. Överdraget är allergitestat och behandlats mot dammkvalster

Bomullsöverdrag

Bomullsöverdraget är tillverkat i ren bomull och är tvättbart i 40°C



Tekniska data

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida www.invacare.se.



Rekommenderad min
och max brukarvikt

	Vikt	Max brukarvikt	Height
Standard	7 - 10.5 kg	40 - 100 kg	100 mm
Basic	8.5 - 12.5 kg	40 - 130 kg	120 mm
Heavy User Light	11 - 16.5 kg	40 - 250 kg	150 mm
Heavy User	12 - 17.5 kg	40 - 350 kg	150 mm
Comfort	11.5 - 17kg	40 - 130 kg	120 mm
Comfort Plus	13.5 - 19kg	40 - 140 kg	140 mm
Child	3 kg	0 - 100 kg	80 mm
Combi	8.5 - 13 kg	40 - 140 kg	140 mm
Top	5 - 7.5 kg	40 - 130 kg	60 mm

1. Madrassens vikt varierar beroende på storlek. Medelvärde är utsatt som en indikation.
2. Madrasserna är tillgängliga i flera olika storlekar beroende på marknadens krav. Kontakta Invacare för mer information

Överdragets färg



Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



© 2018 Invacare International Sàrl. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. All information i denna broschyr stämmer vid tryckningstillfället.
Invacare förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande. Dacapo - SE - 09/2018

