

100 % ROLLATORER



GEMINO



GEMINO - 100 % ROLLATORER

Letar du efter en rollator som passar ditt aktiva liv och låter dig gå bekvämt och tryggt både inomhus och utomhus? Då är Gemino Rollatorer det perfekta valet för dig.

Våra lätta rollatorer sätter nya standarder i komfort säkerhet och design.
Och låter dig vara dig själv.

Gemino finns i ett flertal modeller, storlekar och färger. Självklart finns det också en Gemino för dig som behöver lite extra hjälp och stöd. Det finns alltid en Gemino som passar dina behov och din personliga stil. Vilken du än väljer kommer du alltid att få en 100 % rollator. 100 % komfort, säkerhet och design.





100 %
KOMFORT



DET SKA VARA NJUTBART OCH BEKVÄMT ATT PROMENERA

Våra Gemino rollatorer har utformats med din bekvämlighet i åtanke. En lätt ram av aluminium, material av hög kvalitet och maximal stabilitet säkerställer en bra upplevelse både inomhus och utomhus. Tack var höjdjustering med minnesfunktion är de ergonomiska handtagen alltid i rätt position och om det är dags för en paus kan du sitta säkert på det generösa sätet. Naturligtvis kan du också ta din rollator med dig när du reser – du fäller enkelt ihop den till en kompakt storlek.

Välj den Gemino som passar dig bäst och upplev hur enkelt och bekvämt det kan vara!

// VÄLJ DIN RAMSTORLEK

Att välja rätt storlek kommer inte bara hjälpa dig gå bekvämt och säkert. Varje storlek har också en annan sitthöjd – detta är viktigt för att upprätthålla en korrekt hållning när man sitter (för mer information, se teknisk information på sidan 22).

// SMART JUSTERING AV HANDTAGEN

Det är enkelt att justera de ergonomiska körhandtagen för att passa din längd. Tack vare den speciella minnesfunktion, är de alltid i rätt läge för dig.

// ENKEL ATT FÄLLA IHOP MED ETT SJÄLVLÅSANDE SYSTEM

Tack vare Geminos unika system med en självlåsande mekanism är det mycket enkelt att fälla ihop rollatorn till en kompakt storlek. Sedan kan du bara sätta handtagen i sitt lägsta läge för att minska storleken ytterligare. Praktiskt för små utrymmen och transport i bil. Förresten, visste du att du också kan manövrera i trånga utrymmen när rollatorn är (delvis) hopfälld?

// PRAKTISK ATT ANVÄNDA VARJE DAG

Med Gemino kan du promenera bekvämt - och sitta bekvämt när det är dags för en paus. Kombinera med ett bekvämt ryggstöd för extra stöd. Mycket att bära? Använd den praktiska väskan!



100 % SÄKERHET



VART DU ÄN GÅR

Vart du än går så känner du dig trygg och säker med en Gemino rollator. Den kraftiga och stabila ramen säkerställer maximal säkerhet och de ergonomiska handtagen ger dig utmärkt stöd. Men det finns mer: vi jobbar kontinuerligt för att ta fram smarta lösningar för att underlätta och ge mervärde. Gemino - njut av livet, vart du än går!

// UTOMORDENTLIGT BROMSSYSTEM

Ergonomiskt designade bromsar som är enkla att använda (kräver låg nivå av ansträngning) och som säkerställer optimalt grepp.

// ENKLARE ATT TA SIG ÖVER HINDER

Tramprör gör det enklare att gå över trottoarkanter och trösklar samtidigt som sidostötfångare hjälper dig ytterligare.

// SYNLIIG I MÖRKRET

Six integrerade reflexer på alla sidor hjälper dig att synas i mörkret. För ytterligare säkerhet, välj till den extra belysningen.



GEMINO 20



GEMINO 20

STOR FUNKTIONALITET TILL ETT ATTRAKTIVT PRIS

Letar du efter en rollator med hög kvalitet som erbjuder bra valuta för pengarna? Då är Gemino 20 precis rätt för dig. Den är säker och enkel att använda och med denna lättviktaren kan du promenera stabilt och säkert. Den har också ett unikt system som gör den enkel att fälla ihop för förvaring eller transport i bil. Den är också utrustad med en praktisk väska och ett brett säte - perfekt när du vill ta en paus.

Gemino 20 finns i tre ramstorlekar (färg: grå), välj den modell som passar din längd och njut av 100 % kvalitet och funktionalitet - till ett attraktivt pris.

// GEMINO - ETT SMART VAL

Gemino 20 har alla de tekniska egenskaperna som vår prisbelönta Gemino 30 och kan kombineras med massor av praktiska tillbehör.


// SMIDIG ATT FÖRVARA OCH TRANSPORTERA

Gemino 20 har ett unikt system som gör den mycket enkel att fälla upp, fälla ihop och transportera tack vare en självlåsand mekanism.







100 % ROLLATOR

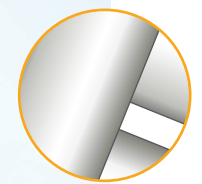


Silvergrå

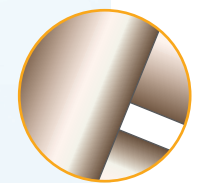


Champagne

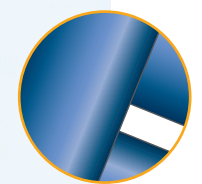


Blå

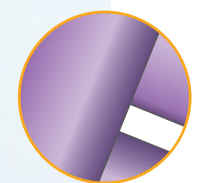


Rosa

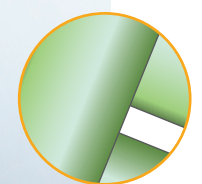

Grön

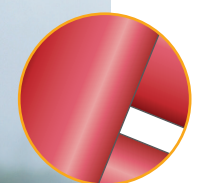

Röd

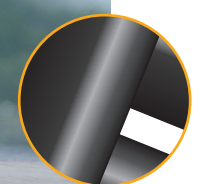

Svart

// ETT FÄRGGLATT SORTIMENT

Välj en av de 7 snygga
ramfärgerna.

// VÄSKOR ATT MIXA OCH MATCHA

Komplettera din Gemino 30
med en snygg och praktisk
väska med axelrem - välj
din favoritfärg!



Grå



Blå



Mintgrön



Rosa



Alcantara svart



Grön



Svart



Röd



GEMINO 30

VAR DIG SJÄLV OCH NJUT AV LIVET

Letar du efter en rollator som har det lilla extra? Gemino 30 - vår mest kompletta rollator - kommer att överträffa dina förväntningar när det gäller komfort, säkerhet och design. Du har möjlighet att anpassa den till ditt aktiva liv och personliga stil.

Med vår prisbelönta Gemino 30 rollator får du "det bästa av det bästa". Med hög manövrerbarhet i kombination med maximerad stabilitet kommer denna rollator att understödja din självständighet. Välj din favoritfärg och praktiska tillbehör.

// PRISVINNANDE DESIGN

Gemino 30 rollator har en internationellt erkänd design av institut som Red Dot, iF och tyska konsumenttidningen Öko-Test.



reddot design award
best of the best 2011





// HJUL SOM GÖR SKILLNAD

De extra stora mjuka hjulen gör det enklare att gå över hinder och ger också en bekvämare känsla, på alla underlag.



// DESIGNAD FÖR ÖVERLÄGSEN STABILITET

Den kraftiga, extra breda och långa ramen tillsammans med de stora hjulen säkerställer stabilitet och säkerhet, också på ojämn terräng.



// NJUT AV MER UTRYMME

De stora hjulhusen ger maximal stabilitet, samtidigt som de erbjuder extra gångutrymme och en mycket rymlig sittplats – också tillgänglig med justerbart ryggstöd med extra komfort. Praktiskt om du behöver ta en paus.



// HANTERING AV EXTRA VIKT

Alla Gemino 60 - modeller passar brukare med en max vikt på 150 kg. Mycket att bära? Den extra slitstarka väskan tål upp till 10 kg.



GEMINO 60

ULTIMAT KOMFORT OCH SÄKERHET - OAVSETT TERRÄNG

Nu går vi! Gemino 60 är den perfekta partnern för en aktiv livsstil! Med sina extra stora och mjuka hjul kan du gå bekvämt och säkert, även på ojämnt underlag. Promenera på kullerstensgatorna i stan, njuta av en promenad i skogen eller helt enkelt bara smidigt ta dig över trösklarna i ditt eget hem? Allt blir så mycket lättare med Gemino 60!

Gemino 60 är designad för ett aktivt utomhusliv och klarar av extra vikt. Den är också enkel att fälla ihop – för enkel förvaring och transport. Gemino 60 - fortsätt vara aktiv och njut av ultimata komfort, vart du än går!



EXTRA STÖD OCH STABILITET ÄVEN BRA VID GÅNGTRÄNING

Behöver du extra stöd när du går så är Gemino 30 Walker det perfekta valet för dig. Denna lättviktsrollator är utrustad med justerbara underarmsstöd för att hjälpa dig att gå bekvämt och säkert. Broms- och körhandtagen är helt integrerade i underarmsstöden - lätta att nå och lätta att använda. Bra för gångträning.

// UNDERARMSSTÖD FÖR ÖKAD STABILITET OCH SÄKERHET

Du kan enkelt justera höjd, djup och vinkel på armstöden för att passa dina behov. Broms- och körhandtagen är helt integrerade i underarmsstöden - lätta att nå och lätta att använda. För bekväma och stabila promenader.

// OLIKA VAL AV AVANCERADE BROMS FÖR ÄNNU HÖGRE SÄKERHET

Vill du ha ännu mer säkerhet? Komplettera Gemino 30 Walker med en kontinuerlig broms med det innovativa bromssystemet SpeedCont. Med SpeedControl bromsar din rollator automatiskt när du börjar accelerera. Det blir lättare att hålla en upprätt hållning att gå tryggt och bekvämt, nära din rollator.



GEMINO 60 walker



OPTIMALT STÖD OCH STABILITET – INOMHUS OCH UTOMHUS

Är du ofta utomhus? Med Gemini 60 Walker får du det bästa av båda världar: Det bekväma mjuka stödet från Gemini 60 samt den ytterligare support och säkerhet du förväntar dig från en Gemini "Walker". Justera underarmsstöden och handtagen så att de passar dina behov och njut av mer frihet både inomhus och utomhus. Självklart är denna lättviktaren också bra för gångträning!

// JUSTERBARA UNDERARMSSTÖD GER FÖRSTÄRKT STABILITET

Underarmsstöden med integrerade körhandtag och bromsar är utformade för optimalt stöd, stabilitet och enkel användning. Justera för att passa din längd och njut av ett bekvämt gångläge.

// BEKVÄM OCH SÄKER VID UTOMHUSBRUK

Gemino 60 Walker har en robust ram och extra stora mjuka hjul och du kan bekvämt och tryggt röra dig utomhus. Gå på kullerstengator eller över trösklar i ditt hem? Med Gemini 60 Walker är det inga problem.



GEMINO 30

SpeedControl



DEN INNOVATIVA ROLLATORN

Letar du efter en rollator med maximal säkerhet? Då är Gemini 30 SpeedControl med sitt innovativa dynamiska bromssystem precis vad du behöver. Du kommer att känna dig helt säker och kan njuta av en jämn gång och en bättre kroppshållning. Den är också utmärkt för gångträning - för både barn och vuxna!

// DYNAMISKT BROMSSYSTEM MED TRE NIVÅER FÖR MAXIMAL SÄKERHET

Det innovativa bromssystemet SpeedControl har tre nivåer och kan enkelt anpassas till dina specifika behov. När du börjar accelerera kommer bromsarna i bakhjulen automatiskt att aktiveras vilket understödjer en upprätt hållning och jämn gång. SpeedControl ger ett kontrollerat motstånd som ökar med hastigheten. När du går i låg fart upplever du inget motstånd. SpeedControl främjar en stadig takt och säkerställer att du går närmare rollatorn och hindrar den från att "springa ifrån" dig. Detta förebygger fall och är också bra för gångträning – både för barn och vuxna!



// ÄVEN BRA TILL BARN

Gemino 30 S SpeedControl, den minsta modellen, ger barn möjlighet att upptäcka världen på ett säkert sätt tack vare det dynamiska bromssystemet.



GEMINO 30

parkinson



DESIGNAD SPECIELLT FÖR PERSONER MED PARKINSONS

En del personer behöver lite extra hjälp för att ta sig fram på ett säkert sätt. Om du har Parkinsons sjukdom är du kanske en av dessa. Vi har utvecklat en rollator med dig i åtanke, med funktioner som är helt anpassade efter just dina behov.

// SLÄPBROMS FRÄMJAR EN JÄMN TAKT

Gemino 30 Parkinson är utrustad med en släpbroms som ger lagom motstånd och hjälper dig att gå i en jämn och stadig takt. Enkel att justera till din önskade nivå.

// EXTRA SÄKERHET MED OMVÄND BROMS

Tack vare det omvända bromssystemet stannar rollatorn omedelbart när du släpper bromsen. Detta ger ökad säkerhet om du ibland har sk "freezing" perioder - då det känns som om dina fötter är fastlimmade i marken.

// LASER FÖR ATT ÖVERKOMMA "FREEZING"

Ett laserljus kan hjälpa dig att komma igång igen när du har en "freezing period". Med denna speciella rollator kan du aktivera ett laserljus via en knapp på handtaget. Genom att koncentrera dig på laserlinjen på marken kan du sedan ta ett steg över den - och komma i rörelse igen.



Monteras höger
eller vänster
sida

100% VAL PRAKTISKA TILLBEHÖR

Gemino rollatorer är inte bara enkla att ställa in och justera. De har också ett stort urval av praktiska och smarta tillbehör för en enklare vardag. En snygg väska, en praktisk kryckkäpphållare, ett bekvämt ryggstöd eller belysning? Välj de tillbehör som passar dina behov och din livsstil!

// VÄSKOR I ETT STORT URVAL AV OLIKA FÄRGER

Komplettera din Gemino med en snygg väska i din favoritfärg. Med handtag och axelrem för enkel hantering.

Ej tillgänglig för Gemino 60 M



Blå



Grå



Svart



Rosa



Grön



Röd



Alcantara svart



Mintgrön

// VÄSKOR TILL GEMINO 30 S



Svart, blåmönstrad sida



Svart, gråmönstrad sida



Svart, rosamönstrad sida





// PARAPLY

Dåligt väder? Med det höjdjusterbara paraplyet på plats kan du gå ut i alla väder, med båda händerna på körhandtagen.



// RYGGSTÖD*

Med det bekväma ryggstödet kan du sitta säkert och bekvämt när det är dags att ta en paus. Ryggstödet behöver inte monteras loss när rollatorn ska fällas ihop.




// JUSTERBART RYGGSTÖD KOMFORT**

För ytterligare komfort, välj det större vadderade ryggstödet. Snabbt att justera och fälls ihop tillsammans med rollatorn.



// BRICKA

Praktisk bricka med kopp-hållare gör det enkelt att transportera mat och dryck.

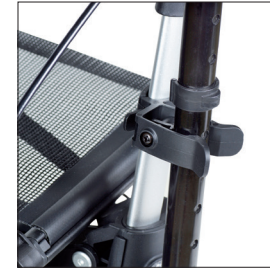

// KRYCKKÄPPHÅLLARE

Håller fast din krycka eller käpp lättillgängligt för dig. Enkel att montera, enkel att nå.




// VÄSKA FÖR SYRGAS***

Axelremsväska för säker förvaring av en syrgasflaska.



// SLÄPBRÖMS*

Ger motstånd för att hjälpa dig gå i jämn takt. Enkel att justera till önskad nivå och enkel att stänga av/på. Släpbröms kan fås till alla modeller men kan ej kombineras med Speed Control.

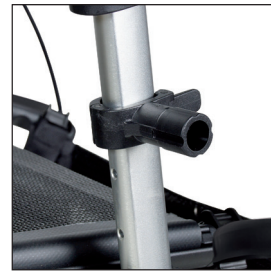

// UNIVERSALFÄSTE

Bra till dina accessoarer.



// BELYSNING

Säkerställer att du syns i mörkret - för extra säkerhet.



// DROPSTÄLLNING

Droppställning med justerbar höjd och vinkel.



Bromsar automatiskt vid plötslig acceleration.


// SPEEDCONTROL

Med det innovativa bromssystemet SpeedControl kommer du att känna dig helt säker när du går. Din rollator kommer att bromsa automatiskt när du börjar accelerera, vilket garanterar en jämn gång och ett bekvämt, upprätt läge. SpeedControl ger ett kontrollerat motstånd som ökar med hastigheten. När du går i låg fart upplever du inget motstånd. SpeedControl förhindrar fall och är också bra för gångträning – för både barn och vuxna! SpeedControl passar modellerna Gemini 20 och 30 (inkl. Walker) men ej till Gemini 60-modellerna.



// ENHANDSBRÖMS

Bekvämt och säker hantering med en hand.

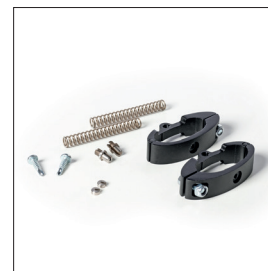

// OMVÄND BRÖMS

Rollatorn stannar omedelbart när du släpper bromsen. För ökad säkerhet.



// STABILISERINGSSTAG

För extra stabilitet. Enkel att ta bort vid transport. Endast till Gemini 30 Walker och Gemini 60 Walker.

**ej tillgänglig för alla modeller, kontrollera tillgänglighet*

*** ej tillgänglig för Gemini 30/30 M Walker*

**** ej tillgänglig för Gemini 60 M.*



GEMINO - ROLLATORGUIDE



GEMINO 20

Lättviktsrollator i snygg design.
God funktionalitet till ett bra pris.



För användning inomhus
och utomhus

Daglig användning



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Även lämplig för barn



Liten vändradie underlättar
körning inomhus



GEMINO 30

Sunrise Medical's mest kompletta 100% rollator.
Prisvinnande design som kombinerar
manövrerbarhet inomhus med hög prestanda
utomhus. Många färgalternativ och tillbehör att
välja mellan.



För användning inomhus
och huvudsakligen i
stadsmiljö utomhus

Daglig användning



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Även lämplig för barn



Liten vändradie underlättar
körning inomhus



Sätt personlig touch med 7
ramfärger och 8 färger på
väskor.
Stort urval av tillbehör



GEMINO 60

Utvecklad för alla typer av underlag och för
kraftiga personer. Lätt men fortfarande solid. Har
alla fördelarna med den prisvinnande Gemini 30
samt ytterligare funktionalitet.



Huvudsakligen
utomhusbruk, också på
ojämnt underlag, även
inomhusbruk

Aktivt bruk/kraftigare
personer



150 kg
150 kg (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Extra bred och lång ram för
optimal stabilitet



Stora och mjuka hjul
säkerställer bästa komfort
och gör det enkelt att ta sig
över hinder



Extra brett säte



Ökad maxvikt (10 kg) i
korgen.

VÄLJ DEN GEMINO SOM PASSAR DIG BÄST



GEMINO 30 walker

Rollator med underarmsstöd
Utmärkt vid gångträning.



För inomhusbruk

Daglig användning /
gångträning



150 kg
130 kg (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Höjddjusterbara
underarmsstöd för extra
support och stabilitet

GEMINO 50 walker

Extra stöd och stabilitet. God komfort inomhus i
kombination med bra prestanda utomhus.
Utmärkt vid gångträning.



Huvudsakligen
utomhusbruk, också på
ojämnt underlag, även
inomhusbruk

Daglig användning /
gångträning



130 kg
130 kg (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Extra bred och lång ram för
optimal stabilitet



Stora och mjuka hjul
säkerställer bästa komfort
och gör det enkelt att ta sig
över hinder



Höjddjusterbara
underarmsstöd för extra
support och stabilitet



Ökad maxvikt (10 kg) i
korgen.

GEMINO 30 SpeedControl

För extra trygghet. Bakhjulsbromsarna slår
automatiskt på när hastigheten ökas plötsligt.
Utmärkt vid gångträning.



För användning inomhus
och huvudsakligen i
stadsmiljö utomhus

Daglig användning/
gångträning



100 kg



150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Även lämplig för barn



Liten vändradie underlättar
körning inomhus



Vid plötslig acceleration
slår de automatiska
bromsarna på.

GEMINO 30 parkinson

Speciellt framtagen för personer med
Parkinsons sjukdom. Kontinuerligt bromsande
hjul för extra motstånd. Som extra trygghet vid
t. ex "freezing" stannar rullatorn omedelbart när
man släpper handtag och broms.



För användning inomhus
och huvudsakligen i
stadsmiljö utomhus

Daglig användning



130 kg
130 kg (M)



150-200 cm
135-170 cm (M)



Liten vändradie underlättar
körning inomhus



Omvänt bromssystem:
rollatorn stannar
omedelbart när bromsen
släpps




Kontinuerligt bromsande
hjul ger extra motstånd och
främjar en jämn takt




Laserljus kan aktiveras för
att hjälpa till att överkomma
"freezing"

GEMINO TEKNISK INFORMATION

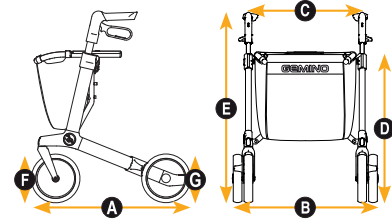

90

		GEMINO 20			GEMINO 30			GEMINO 60	
		20	20M	20S	30	30M	30S	60	60M
MÅTT									
Max brukarvikt	kg	150	130	125	150	130	125	150	150
Rekommenderad brukarlängd	cm	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170
Max vikt i korgen	kg	5	5	5	5	5	5	10	10
Total längd A	cm	65	65	68	65	65	68	74	74
Total bredd B	cm	60	60	55	60	60	55	64	64
Total vikt utan korg (med korg)	kg	7.1 (7.3)	7.0 (7.2)	6.6 (6.8)	7.1 (7.4)	7.0 (7.3)	6.6 (6.8)	8.5 (8.8)	8.2 (8.5)
Bredd mellan körhandtag C	cm	47	47	42	47	47	42	51	51
Sitthöjd D	cm	62	55	48	62	55	48	62	53
Total höjd E	cm	78 - 100	69 - 88	65 - 77	78 - 100	69 - 88	65 - 77	76-95	73 - 83
Total höjd, ihopfälld	cm	80	76	69	80	76	69	84	80
Total längd, ihopfälld	cm	65	65	68	65	65	68	74	74
Total bredd, ihopfälld	cm	23	23	23	23	23	23	23	23
Diameter framhjul F	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	28 x 4.2	28 x 4.2
Diameter bakhjul G	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	23 x 4.2	23 x 4.2
PRESTANDA									
Vändradie	cm	84	84	79	84	84	79	95	95
FÄRGALTERNATIV									
Grå (standard)		✓	✓	✓					
Silvergrå					✓	✓	✓	✓	✓
Champagne					✓	✓			
Midnattsblå					✓	✓	✓		
Rosa					✓		✓		
Svart					✓	✓			
Äpplegrön					✓				
CERTIFIKAT									
CE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 12182		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-3									

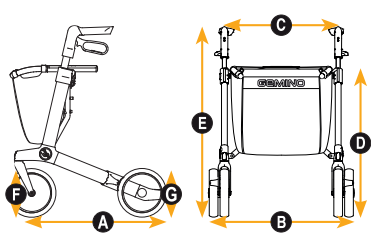

		GEMINO 30 walker		GEMINO 60 walker		GEMINO 30 SpeedControl			GEMINO 30 parkinson		
		30	30M	60	60M	30	30M	30S	30	30M	
MÅTT											
Max brukarvikt	kg	150	130	130	130	100	100	100	130	130	
Rekommenderad brukarlängd	cm	150-200	135-170	150-200	135-170	150-200	135-170	125-165	150-200	135-170	
Max vikt i korgen	kg	5	5	10	10	5	5	5	5	5	
Total längd A	cm	65	65	74	74	65	65	68	65	65	
Total bredd B	cm	61	61	64	64	60	60	55	60	60	
Total vikt utan korg (med korg)	kg	10.6 (10.9)	10.4 (10.7)	11.8 (12.1)	11.6 (11.9)	8.7 (8.9)	8.6 (8.8)	8.2 (8.4)	7.5 (7.8)	7.4 (7.7)	
Bredd mellan körhandtag C	cm	25.5	25.5	32	32	47	47	42	47	47	
Sitthöjd D	cm	62	55	62	53	62	55	48	62	55	
Total höjd E	cm	98 - 111.5	84 - 100	98.5 - 115.5	89.5 - 98.5	78 - 100	69 - 88	65 - 77	78 - 100	69 - 88	
Total höjd, ihopfälld	cm	97	89	109	101	80	76	69	80	76	
Total längd, ihopfälld	cm	65	65	74	74	65	65	68	65	65	
Total bredd, ihopfälld	cm	35.5	35.5	35.5	35.5	23	23	23	23	23	
Diameter framhjul F	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	28 x 4.2	28 x 4.2	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	
Diameter bakhjul G	cm	20 x 3.6	20 x 3.6	23 x 4.2	23 x 4.2	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	20 x 3.6	
PRESTANDA											
Vändradie	cm	84	84	95	95	84	84	79	84	84	
FÄRGALTERNATIV											
Grå (standard)											
Silvergrå		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Champagne											
Midnattsblå								✓			
Rosa								✓			
Svart											
Äpplegrön											
CERTIFIKAT											
CE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 12182		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ISO 11199-2						✓	✓	✓	✓	✓	
ISO 11199-3		✓	✓	✓	✓						

För ytterligare information om fullständiga specifikationer, tillval och tillbehör hänvisas till beställningsformuläret. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Vid frågor, kontakta Sunrise Medical direkt.





Sunrise Medical arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla sina produkter och material. Det kan därför förekomma skillnader på produkten jämfört med denna trycksak.



Sunrise Medical AB

Neogatan 5
431 53 Mölndal
Tel.: 031-748 37 000
E-post: post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se



För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor. Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format via SunriseMedical.se

BRO_NR99400_Gemino_2020-08-31