

# Birdie<sup>®</sup> EVO



Optimerad design för säkra förflyttningar

SLOW'R<sup>®</sup> | SMARTLOCK<sup>®</sup>



# En evolution inom mobila golvlyftar

**Birdie<sup>EVO</sup>** har designats för att erbjuda nya valmöjligheter baserat på ny teknologi. **Birdie<sup>EVO</sup>** ger användaren maximal komfort och säkerhet i samband med lyft och förflyttning från säng, stol och golv.

Den nya lyften har utvecklats efter feedback från marknaden och med utgångspunkt i redan välkända **Birdie**. Vi har bibehållit det som uppskattades hos **Birdie** samtidigt som nya funktioner lagts till för att förbättra upplevelsen för både användare och vårdare.

## Imponerande lyftintervall

**Birdie<sup>EVO</sup>** utför ett ergonomiskt lyft och bygelns kan enkelt rotera 360°, vilket underlättar för vårdaren att positionera korrekt och minskar oro hos användaren.

## Maximerad yta

Den höga lyftarmen ger gott om utrymme, även när lyften är i sin högsta position, och det optimerade utrymmet framför motorn minskar risken att användarens knän slår i.



## Enkel att hantera, transportera och förvara

**Birdie<sup>EVO</sup>** kan enkelt fällas ihop och monteras upp igen utan behov av verktyg. Lyften tar upp minimalt med plats vid förvaring och är enkel att flytta samt transportera. Vid behov kan lyftarmen enkelt tas isär från underredet (inga verktyg behövs).

**Birdie<sup>EVO COMPACT</sup>** har en så låg vikt som 31 kg vilket gör den ännu enklare att transportera och förvara.



**NYA**

**INNOVATIVA  
FUNKTIONER**



### Slow'R®

- ▶ Integrerad dämpare minskar gungning.



### SMARTLOCK®

- ▶ Byt lyftbygel säkrare och enklare än tidigare med vår nya snabbkoppling. Inga verktyg behövs.



### Designad krok

- ▶ Fäst lyftselen säkert med ena handen tack vare en ny användarvänlig design på kroken.

### Fler **NYA** funktioner



- ▶ Ergonomiskt körhandtag gör hantering och manövrering ännu enklare.



- ▶ Distinkt rundad design av lyftarm och lyftbygel möjliggör bibehållen ögonkontakt med brukaren under hela förflyttningen.



- ▶ Den ergonomiska designen med rundade ben ger en omslutande känsla och lyften kan enkelt placeras runt t ex en komfort- eller elrullstol.



## 3 nyckelfunktioner

Från lyftarmen till lyftbygel  
till selen



### ◀ Slow'R® PATENTERAD Minska gungning

En dämpare har designats och integrerats i lyftarmen för att minska gungningen, ge en mer **komfortabel upplevelse** för användaren och **ökad kontroll** hos vårdaren under lyft och förflyttningar.



### ◀ SMARTLOCK® PATENTERAD Förenkla och säkra låsningen

En ny snabbkoppling gör det enkelt och säkert att byta lyftbygel utan verktyg. **Ökad säkerhet** erbjuds via snabbkopplingen som ytterligare säkras med en låssprint för att garantera att delarna stannar på plats.



### ◀ Ny design på kroken Enkelt att fästa selar

En ny ergonomiskt designad krok gör det möjligt att fästa selens ögla med bara ena handen. En bredare krok gör det **enklare att trä på öglan** medan krokens överdel har designats för att **förhindra att öglorna oavsiktligt lossnar från kroken**, vilket minskar risken för skador.

# Introduktion av **Birdie<sup>EVO</sup>** familjen

## Våra mobila golvlyftar.

## Designade med användare och vårdare i åtanke



### **Birdie<sup>EVO</sup>**

#### ▲ Den nya standarden inom mobila lyftar

En nydesignad version av den populära lyften Birdie, skapad för säkra förflyttningar både i hemsjukvård och på vårdboenden.



### **Birdie<sup>EVO COMPACT</sup>**

#### ▲ Mindre storlek för enklare manövrering

Den mindre storleken hos Birdie<sup>EVO COMPACT</sup> möjliggör enkla lyft i miljöer med begränsat utrymme.



### **Birdie<sup>EVO PLUS</sup>**

#### ▲ Ytterligare funktioner för förbättrad funktionalitet

Vår premium modell med en avancerad kontrollbox som kan registrera serviceintervall, har skyddskåpor och större bakhjul.

**Lyftintervall** ▶ 415 - 1660 mm

▶ 530 - 1590 mm

▶ 415 - 1660 mm

**Max brukarvikt** ▶ 180 kg

▶ 150 kg

▶ 180 kg

**Svängradie** ▶ 1400 mm

▶ 1070 mm

▶ 1400 mm


## Egenskaper och tillbehör:

- ▶ Elektrisk eller mekanisk benspridning
- ▶ Elektrisk eller mekanisk nödsänkning
- ▶ Snäpplös för optimal säkerhet
- ▶ 2- eller 4-punktsbyglar i olika storlekar
- ▶ Brett utbud av lyftselar i olika storlekar, modeller och material
- ▶ Handtag för mekanisk benspridning
- ▶ Våg för hemsjukvård eller medicinskt bruk



## Tekniska data ▼

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

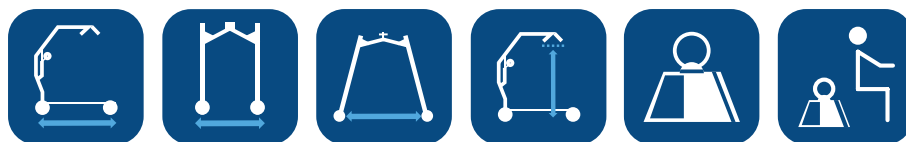

Längd ▼      Bredd ▼      Invändig bredd med öppna ben ▼      Lyftintervall ▼      Produktvikt ▼      Max brukarvikt ▼

<b>Birdie<sup>EVO</sup></b>	1220 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	40 kg	180 kg
<b>Birdie<sup>EVO COMPACT</sup></b>	1080 mm	520 mm	815 mm	530 - 1590 mm	31 kg	150 kg
<b>Birdie<sup>EVO PLUS</sup></b>	1235 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	41 kg	180 kg



Benhöjd ▼      Frigång ▼      Höjd ihopfälld ▼      Svängradie ▼      Antal cykler\* ▼

<b>Birdie<sup>EVO</sup></b>	115 mm	35 mm	455 mm	1400 mm	40 cykler
<b>Birdie<sup>EVO COMPACT</sup></b>	115 mm	35 mm	455 mm	1070 mm	40 cykler
<b>Birdie<sup>EVO PLUS</sup></b>	115 mm	35 mm	470 mm	1400 mm	40 cykler

Alla mått är med 100mm hjul och 2-punktsbygel.  
För 75mm hjul, minska höjd med 15 mm.

\*Med batteriladdning mellan 100% and 50%

## Färg ▼



**Ljusgrå:**  
Lyftarm och lyftbygel  
RAL: 7035



**Anthracite:**  
bas och körhandtag  
RAL: 7016

Vänligen notera att färgerna kan variera något från de som visas ovan

## Regulatoriska data ▼



**Kundservice: 08-761 70 90**  
Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden



**Yes, you can.®**