



2024

**FABRICANTE POLACO DE EQUIPAMENTO DE
REABILITAÇÃO PARA CRIANÇAS**



subotus

Fundada em 2009, a MyWam pretende ser líder global na produção de carrinhos de bebé para crianças determinadas. O objetivo tem por base misturar tecnologia avançada com empatia, trazendo cor, alegria e calor para as vidas dos utilizadores. Começando pelos equipamentos de reabilitação, fomos enriquecidos pelas crianças que servimos, guiando a nossa paixão e desbloqueando o nosso potencial.

Em 2014, a nossa visão materializou-se no **carrinho MEWA**, uma mistura de funcionalidade, segurança e elegância que rapidamente encontrou sucesso no mercado nacional. Isto inspirou-nos a expandir a nossa gama, apresentando o **PEGAZ, MOUSE, GRIZZLY, YETI, ZEFIR** e **ALFA**.

Hoje, os nossos produtos são uma prova do nosso forte compromisso. Cada carrinho personifica não só equipamento, mas companhia na vida vibrante das crianças que servimos. **Na MyWam, estamos na centro da tecnologia e da devoção, dedicados a causar um impacto diário para aqueles que mais nos inspiram.**

our PRODUCTS

Class 1 MEDICAL DEVICE



**European Medical
Device Regulation (MDR)**



Management
System Certificate
for Medical Devices
ISO 13485!

**TRATAM-SE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.
UTILIZE-OS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO OU COM O
RÓTULO.**



RDC MEDICAL



Rua das Hortas, 75, 4795-490, STS



www.rdcmedical.pt

Pegaz

CARRINHO PARA CRIANÇAS COM PCI



INFORMAÇÕES GERAIS

O carrinho PEGAZ para necessidades especiais foi concebido para as crianças que são incapazes de andar ou sentar-se numa posição correta como resultado de lesões, doenças ou disfunções motoras. O carrinho de bebé é adequado para utilizadores com altura entre **80 - 140 cm** e um peso máximo de **40 kg**.

PEGAZ é um carrinho ultraleve tipo guarda-chuva feito de alumínio e ligas de aço equipado com o sistema "**I Grow With You**", inserções estreitas, encosto reclinável e uma ampla gama de acessórios. Simples de dobrar, convenientemente compacto (a partir de 10kg) e fácil de manobrar.



MEDICAL DEVICE - CLASS I


CORES



estofos



estofos

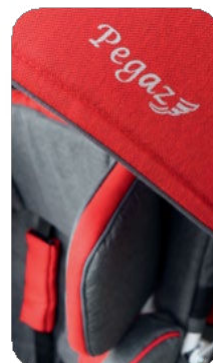

CARACTERÍSTICAS / SEGURANÇA E CONFORTO

POSIÇÃO DO ASSENTO



25°

1 posições

RECLINAÇÃO DO ENCOSTO



22°, 34°

2 posições

APOIO PARA OS PÉS AJUSTÁVEL



20, 30, 40cm

3 posições

EU CRESCO CONTIGO

Opções de ajuste abrangentes



ESTRUTURA LEVE DOBRÁVEL

Facilidade de armazenamento e transporte



A construção de uma só peça, **formato guarda-chuva** do carrinho Pegaz permite uma dobragem rápida e fácil que, devido ao seu tamanho compacto e baixo peso, facilita o uso diário, armazenamento e transporte.

APOIO À CONDUÇÃO



O carrinho é equipado com **suspensão amortecedora de impactos** nas quatro rodas, **rodas dianteiras giratórias** com opção de bloqueio, **dois travões de rodas traseira independentes** e **trepas passeios**.

INDICAÇÕES

- paralisia e paresia de membros inferiores de várias origens
- paralisia e paresia do tronco
- fraqueza dos músculos posturais, responsáveis pela manutenção da posição corporal correta
- paralisia cerebral
- mielomeningocele
- distrofias musculares

CONTRAINDICAÇÕES

Em caso de contraindicações para a posição sentada e/ou verticalização passiva, os ajustes devem apenas se efetuados por um técnico especializado

ACESSÓRIOS FUNCIONAIS NA PRÁTICA



EQUIPAMENTOS



**COBERTURA COM
JANELA**



APOIO DE CABEÇA



CINTOS DE ABDUÇÃO



BARRA DE SEGURANÇA



**CINTO DE CINCO
PONTOS**



**CUNHA
AJUSTÁVEL**



TABULEIRO



**COBERTURA COM
JANELA**



CESTO DE COMPRAS



MALA DE VIAGEM



GUARDA-SOL



CAPA DE CHUVA



SACO DE DORMIR



REDE MOSQUITOS

PARÂMETROS TÉCNICOS DO CARRINHO

Largura do assento: 30*/38 cm

Profundidade efetiva do Assento: 25/33 cm

Altura do encosto: 50/60 cm

Largura do encosto: 30*/37 cm

Distância entre o pé e o assento: 20, 30, 40 cm, 3 posições

*os valores são dados com encartes

Peso total: 10 - 19,6 kg

Comprimento do carrinho: 90 - 108 cm

Altura do carrinho: 106 - 130 cm

Largura do carrinho de bebê: 56 cm

NOTA IMPORTANTE! A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um técnico, médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.



RDC MEDICAL



Rua das Hortas, 75, 4795-490, STS



www.rdcmedical.pt



ZEFIR

CARRINHO PARA CRIANÇAS COM PCI

NEW

INFORMAÇÕES GERAIS

O carrinho para crianças com PCI ZEFIR é um equipamento leve e compacto dedicado a crianças com deficiência entre **os 80 e os 140 cm** de altura e com um peso corporal máximo até **40 kg**.

ZEFIR tem muitas funções úteis, tais como a capacidade de inclinar o encosto e ajustar a altura do apoio para os pés. Também permite a alteração da profundidade do assento, da largura (**instalando inserções estreitas**) e a altura do encosto (**instalando extensões**), para que cresça com o utilizador.



MEDICAL DEVICE - CLASS I

Como todos os carrinhos para PCI MyWam, o ZEFIR tem uma vasta gama de acessórios adicionais que facilitam a organização de caminhadas diárias e são úteis em condições meteorológicas menos favoráveis.

**ESTE É UM DISPOSITIVO MÉDICO.
UTILIZE-O DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO OU COM O
RÓTULO.**

frame branco / brilhante

frame preto / mate




INDICAÇÕES


- paralisia e paresia de membros inferiores de várias origens
- paralisia e paresia do tronco
- fraqueza dos músculos posturais, responsáveis pela manutenção da posição corporal correta
- paralisia cerebral
- mielomeningocele
- distrofias musculares

CONTRAINDICAÇÕES

Em caso de contraindicações para a posição sentada e/ou verticalização passiva, os ajustes do carrinho devem ser efetuados por um técnico especializado.

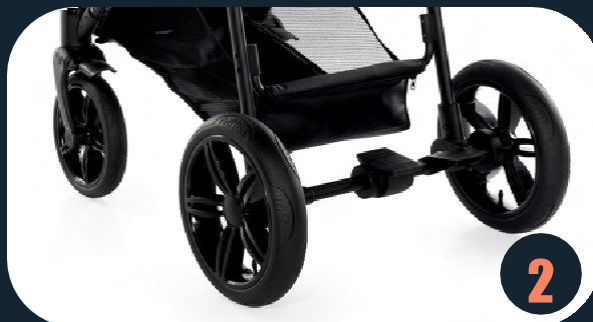

Existem dois tipos de rodas para escolher no carrinho **ZEFIR**. Rodas **SLIM de série (1)** e **rodas todo-o-terreno (2)** para condução em pisos mais irregulares.

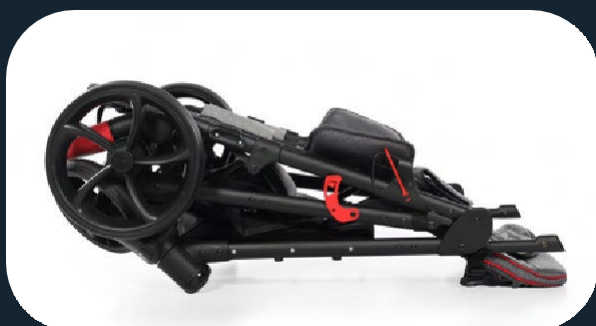

O design leve e compacto do carrinho facilita o seu transporte e armazenamento.



O DESIGN DO ZEFIR PERMITE ADAPTAR O SEU TAMANHO À CRIANÇA.



CONFIGURAÇÕES
MÍNIMAS



CONFIGURAÇÕES MÁXIMAS



AJUSTE DA ALTURA DO
APOIO PARA OS PÉS

Graças a um mecanismo simples, é possível diminuir a altura do apoio de pés para **40 cm** abaixo do nível do assento. A borda rebatida do assento permite aumentar a sua superfície em **6 cm**, permitindo uma profundidade máxima de **30 cm**. As extensões do encosto permitirão que este seja aumentado em **10 cm**.

É possível instalar inserções laterais flexíveis que reduzem a largura do assento.



25°, 57°
2 posições

AJUSTE DA INCLINAÇÃO DO
ENCOSTO

ACESSÓRIOS



**INSERÇÕES
ESTREITAS**



**EXTENSÃO DO
ENCOSTO**



**BARRA DE
SEGURANÇA**



**CINTOS DE
ABDUÇÃO**



**CINTOS DE
CINCO PONTOS**



CUNHA AJUSTÁVEL



TABULEIRO



**COBERTURA COM
JANELA**



APOIO DE CABEÇA



MALA DE VIAGEM



CESTO DE COMPRAS



GUARDA-SOL



LUVAS DE INVERNO



CAPA DE CHUVA



SACO DE DORMIR



REDE MOSQUITOS

PARÂMETROS TÉCNICOS DO CARRINHO

Largura do assento: 29*/38 cm

Profundidade efetiva do assento: 24/30 cm

Altura do encosto: 50/60 cm

Largura do encosto: 29*/37 cm

Distância entre o pé e o assento: 20, 30, 40 cm, 3 posições

*os valores são dados com encarte

Peso total: 13 - 18 kg

Comprimento do carrinho: 98 - 113 cm

Altura do carrinho: 102 - 138 cm

Largura do carrinho: 62 cm

NOTA IMPORTANTE! A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.



RDC MEDICAL



Rua das Hortas, 75, 4795-490, STS



www.rdcmedical.pt

RDC Medical MyWam®

mouse

CARRINHO PARA CRIANÇAS COM PCI



CE MD MEDICAL DEVICE - CLASS I

GERAL INFORMAÇÃO

O carrinho de bebé para crianças com **necessidades especiais MOUSE** foi concebido para os utilizadores mais jovens que são incapazes de andar ou sentar-se numa posição correta como resultado de lesões, doenças ou disfunções motoras. O carrinho de bebé é adequado para crianças com altura entre **80 – 110 cm** e um peso máximo de **30 kg**.

Graças à basculação e reclinção do encosto, bem como torso ajustável e almofadas de cabeça, o **MOUSE** é facilmente ajustável para a posição desejada e garantir ao utilizador a proteção e estabilidade ideais.

As suspensões amortecedoras de choques nas quatro rodas, juntamente com o trepa-passeios incluído, facilitam a deslocação em terrenos irregulares. O design moderno e elegante é uma vantagem adicional deste carrinho.

INDICAÇÕES

Paralisia e paresia de membros inferiores de várias origens, paralisia e paresia do tronco, enfraquecimento dos músculos posturais responsáveis por manter a posição corporal correta, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofias musculares.

CONTRINDICAÇÕES

Em caso de contraindicações para a posição sentada e/ou verticalização passiva, os ajustes devem apenas se efetuados por um técnico especializado.

CARACTERÍSTICAS / SEGURANÇA E CONFORTO

BASCULAÇÃO

mecanismo simples



8° - 23°

4 posições

KIT MINIMIZADOR DE ASSENTOS

reduzindo a inserção



O kit de minimização de assentos no **mouse** é uma inserção confortável, que permite reduzir a largura e a profundidade do assento.

ENCOSTO RECLINÁVEL

Ampla gama de ajustes



16° - 88°

4 posições

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

almofadas ajustáveis



O suporte da cabeça e do tronco consistem em dois pares de almofadas independentes que são ajustáveis em altura, largura e ângulo.

APOIO DE PÉS AJUSTÁVEL EM ÂNGULO/ALTURA

ajuste simples e rápido



84° - 173°

6 posições

POSIÇÃO CAMA

ampla gama de reclinção do encosto



Com um assento totalmente ajustável e apoio para os pés, é possível ajustar o carrinho para a posição cama, perfeita para um pequeno descanso ou uma soneca.

ASSENTO REVERSÍVEL



O design do carrinho de bebé permite-lhe rodar facilmente o banco em sentido oposto ao sentido de condução

ESTRUTURA LEVE DOBRÁVEL

facilidade de armazenamento, transporte e desmontagem



A construção dos elementos principais permite-lhe desmontar o **MOUSE** em 3 unidades separadas (quadro, banco e rodas).

APOIO À CONDUÇÃO

Conforto para as viagens mais acidentadas



O carrinho de bebé está equipado com **uma suspensão amortecedora de impactos** nas quatro rodas.

ACESSÓRIOS FUNCIONAIS NA PRÁTICA



1 Cobertura com janela



2 Kit de minimização



3 Almofadas de tronco/cabeça



4 Apoio para os pés ajustável



5 Rodízio dianteiro giratório com opção de bloqueio



6 Suporte de libertação rápida nas 4 rodas




EQUIPAMENTOS



KIT DE MINIMIZAÇÃO

SUPORTES DE
CABEÇA/TRONCO
AJUSTÁVEISCINTOS DE
ABDUÇÃOBARRA DE
SEGURANÇACINTO DE CINCO
PONTOS

CUNHA AJUSTÁVEL

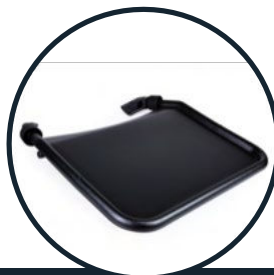

TABULEIRO

COBERTURA COM
JANELA

LUVAS DE INVERNO



MALA DE VIAGEM



CESTO DE COMPRAS



GUARDA-SOL



CAPA DE CHUVA



SACO DE DORMIR



REDE MOSQUITOS

PARÂMETROS TÉCNICOS DO CARRINHO

Largura do assento: 24*/32 cm
 Profundidade efetiva do assento: 22*/26 cm
 Altura do encosto: 52 cm
 Largura do encosto: 30 cm
 Distância entre o pé e o assento: 14,5 - 23 cm, 4 posições

*os valores são dados com suportes

Peso total: 17,2 - 23,2 kg
 Comprimento do carrinho: 95 - 124 cm
 Altura do carrinho de bebê: 122 - 134 cm
 Largura do carrinho de bebê: 60 cm


NOTA IMPORTANTE! A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um técnico, médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.



CE MD MEDICAL DEVICE - CLASS I

mewa

CARRINHO PARA CRIANÇAS COM PCI

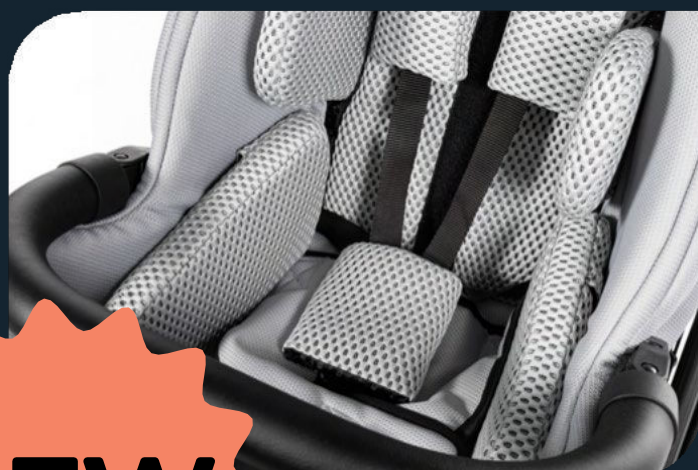

NEW

INFORMAÇÕES GERAIS

O carrinho de bebé para necessidades especiais

MEWA foi concebido para os utilizadores mais jovens que são incapazes de andar ou sentar-se numa posição correta como resultado de lesões, doenças ou disfunções motoras. O carrinho é adequado para crianças com altura entre **90 – 125 cm** e um peso máximo de **40 kg**.

Graças à basculação do assento e reclinção do encosto, bem como dos vários suportes ajustáveis, o **MEWA** Permite obter posição desejada e garantir ao utilizador proteção e estabilidade ideais.

As suspensões amortecedoras de choques nas quatro rodas, juntamente com o trepa -passeios incorporado, facilitam a deslocação em terrenos irregulares. O design moderno e elegante é uma vantagem adicional deste carrinho.

INDICAÇÕES

- paralisia e paresia de membros inferiores de várias origens
- paralisia e paresia do tronco
- fraqueza dos músculos posturais, responsáveis pela manutenção da posição corporal correta
- paralisia cerebral
- mielomeningocele
- distrofias musculares

CONTRAINDICAÇÕES

Em caso de contraindicações para a posição sentada e/ou verticalização passiva, os ajustes devem apenas se efetuados por um técnico especializado.



CONSTRUÇÃO LEVE

O design leve do carrinho de bebê é uma solução ideal para pais que valorizam a mobilidade e o conforto. O carrinho é fácil de transportar e manobrar, o que torna as caminhadas e viagens menos onerosas. Ao mesmo tempo, também facilita a dobragem e o armazenamento do carrinho de bebê.



NOVO MATERIAL PARA ESTOFOS

O material utilizado na construção do carrinho de bebê é amigo tanto das pessoas como dos animais. Feito de matérias-primas seguras e não tóxicas, atende aos mais altos padrões ecológicos e de qualidade. É suave na pele da criança e, ao mesmo tempo, durável e resistente a danos.



ABSORÇÃO DE CHOQUES

A absorção de choques nos carrinhos de bebê é crucial para o conforto e a segurança. Amortece eficazmente os choques em terrenos irregulares, o que permite que a criança viaje em paz e sem qualquer desconforto. Ao mesmo tempo, facilita a condução do carrinho, permitindo manobras suaves, o que reduz a carga sobre os pais.



RESPIRÁVEL MATERIAL

O interior do carrinho e parte dos acessórios são feitos de material respirável que proporciona excelente circulação de ar. Graças a isso, a criança sente-se confortável mesmo durante longas caminhadas, e a pele permanece seca e livre de irritação. O material não é apenas respirável, mas também macio e delicado, o que aumenta adicionalmente o conforto de uso.



CESTO DE COMPRAS

O cesto de compras com capacidade até 3 kg, montado no carrinho **Mewa**, é uma solução conveniente para os pais. Permite que os acessórios sejam facilmente transportados.



PNEUS DE POLIURETANO DURÁVEIS

Pneus extremamente duráveis e flexíveis, feitos inteiramente de poliuretano, por isso não há necessidade de bombeá-los. Este design reduz significativamente o risco de danos acidentais, garantindo fiabilidade e longa vida útil.



TECNOLOGIA UV 50

A tecnologia UV nos tecidos protege contra o desbotamento, pelo que as cores permanecem intensas apesar da exposição ao sol.



ASSENTO REVERSÍVEL

O design do carrinho de bebê permite rodar facilmente o banco oposto ao sentido de condução. Graças a este recurso, a experiência "face-to-face" entre Pais e filho é garantida a 100%.



COBERTURA DOBRADA




COBERTURA DESDOBRADA



VENTILAÇÃO DA COBERTURA

O novo design da cobertura para o carrinho combina elegância e funcionalidade. Graças ao inovador sistema de extensão da viseira, a copa proporciona uma proteção ainda melhor contra o sol, adaptando-se às mudanças das condições meteorológicas. Além disso, a ventilação embutida garante um fluxo de ar ideal, que é crucial em dias quentes, protegendo a criança de temperaturas elevadas.

OUTRAS CORES PARA ESTOFOS

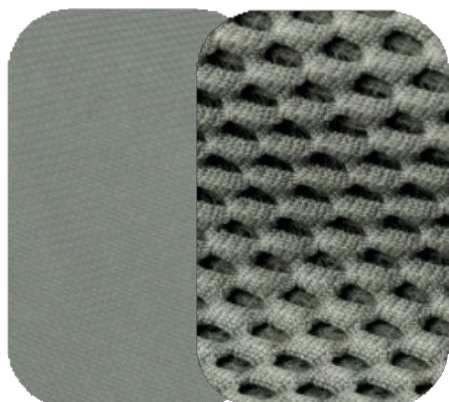

VERDE



BEGE



PRETO

EQUIPAMENTOS



KIT DE MINIMIZAÇÃO



SUPPORTES DE TRONCO/CABEÇA AJUSTÁVEIS



CINTOS DE ABDUÇÃO



BARRA DE SEGURANÇA



CINTO DE CINCO PONTOS



CUNHA AJUSTÁVEL



TABULEIRO



COBERTURA COM JANELA



LUVAS DE INVERNO




MALA DE VIAGEM



CESTO DE COMPRAS



GUARDA-SOL

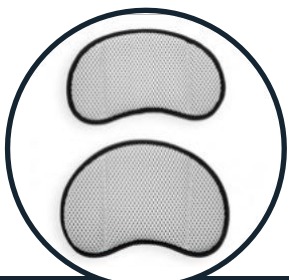

SET CONFORTO



SACO DE DORMIR



REDE MOSQUITOS



CAPA DE CHUVA

PARÂMETROS TÉCNICOS DO CARRINHO

Largura do assento: 25*/32 cm
 Profundidade efetiva do assento: 24*/28 cm
 Altura do encosto: 62 cm
 Largura do encosto: 20*/30 cm
 Distância entre o pé e o assento: 17 - 32 cm, 5 posições

*os valores são dados com almofadas

Peso total: 20,5 - 25 kg
 Comprimento do carrinho: 97 - 132 cm
 Altura do carrinho de bebê: 125 - 128 cm
 Largura do carrinho de bebê: 62,5 cm

NOTA IMPORTANTE! A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um técnico, médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.




Grizzly

INFORMAÇÕES GERAIS

O carrinho **GRIZZLY** para necessidades especiais é projetado para as crianças que são incapazes de andar ou sentar-se em uma posição correta como resultado de lesões, doenças ou disfunções motoras. O carrinho de bebê é adequado para crianças a uma altura de **85 - 140 cm** e um peso máximo de **45 kg**.

O **GRIZZLY** está equipado com o sistema "**I Grow With You**" que lhe permite uma extensão suave da altura do encosto e da profundidade do assento à medida que a criança cresce. Além disso, o **GRIZZLY** oferece um sistema de estabilização abrangente composto por almofadas ajustáveis ao nível da cabeça, ancas e peito - juntamente com um apoio para os pés totalmente ajustável, basculação do assento e encosto reclinável. Este é um carrinho que é adaptado para atender às necessidades do utilizador, durante anos. Grizzly possui "**Crash Test**", podendo, desta forma, o utilizador ser transportado no carrinho num veículo adaptado, em segurança.

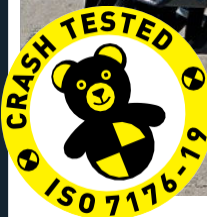

MEDICAL DEVICE - CLASS I

INDICAÇÕES

Paralisia e paresia de membros inferiores de várias origens, paralisia e paresia do tronco, enfraquecimento dos músculos posturais responsáveis por manter a posição corporal correta, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofias musculares.

CONTRINDICAÇÕES

Em caso de contraindicações para a posição sentada e/ou verticalização passiva, os ajustes do carrinho devem ser efetuados por um técnico especializado.



BASCULAÇÃO DO ASSENTO

mecanismo simples



0° - 30°

4 posições

ENCOSTO RECLINÁVEL

Ampla gama de ajustes



0° - 81°

4 posições

APOIO DE PÉS AJUSTÁVEIS EM ÂNGULO E POSIÇÃO

ajuste simples e rápido



55° - 180°

5 posições

I GROW WITH YOU

reduzindo a inserção



O sistema "I GROW WITH YOU" permite estender a profundidade do assento até 37 cm, a altura do encosto até 70 cm (sem necessidade de ferramentas). Concebido para se adaptar e evoluir!

SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

almofadas ajustáveis



Um sistema de apoio completo composto por **quatro pares independentes de almofadas (cabeça, tronco, ancas e laterais)** garante o máximo de possibilidades de ajuste, bem como o maior conforto e segurança durante a viagem.

POSIÇÃO DEITADA

ampla gama de reclinção do encosto



Com um assento totalmente ajustável e apoio para os pés possíveis de colocar na posição 180°, a "posição deitado" permite ao utilizador um momento de descanso e relaxamento total, sempre que necessário.

ASSENTO REVERSÍVEL


"Face to face" entre Pais e filho



O design do carrinho de bebê permite-lhe rodar facilmente o banco em sentido oposto ao sentido de condução. Graças a este recurso, você pode manter um olho em seu filho o tempo todo.

ESTRUTURA LEVE DOBRÁVEL

facilidade de armazenamento, transporte e desmontagem

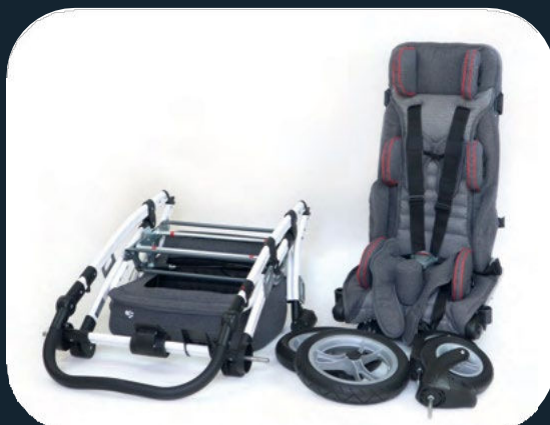

A construção dos elementos principais permite desmontar o **Grizzly** em 3 unidades separadas (quadro, assento e rodas).

APOIO À CONDUÇÃO

Conforto para as viagens mais acidentadas



O carrinho de bebê está equipado com **uma suspensão amortecedora** de impactos nas quatro rodas e **uma suspensão traseira ajustável** nas rodas traseiras, rodas dianteiras giratórias com opção de bloqueio, **travão central** e **um pé inclinado**.

ACESSÓRIOS FUNCIONAIS NA PRÁTICA**1**

Cobertura com janela

2

Almofadas do tronco/cabeça/anca

3

Barra de segurança

4

Apoio para os pés ajustável

5

Rodízio dianteiro giratório com opção de bloqueio

6

Quick release em todas as rodas




EQUIPAMENTOS



PADS LATERAIS

ALMOFADAS AJUSTÁVEIS
CABEÇA/TRONCO/ANCAS

CINTOS DE ABDUÇÃO

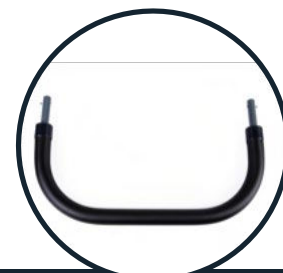BARRA DE
SEGURANÇACINTO DE 5
PONTOSCUNHA
AJUSTÁVEL

TABULEIRO

COBERTURA COM
JANELA

LUVAS DE INVERNO



MALA DE VIAGEM



CESTO DE COMPRAS



GUARDA-SOL



CAPA DE CHUVA



SACO DE DORMIR



REDE MOSQUITOS



CONJUNTO URSO

PARÂMETROS TÉCNICOS DO CARRINHO

largura do assento: 18* - 40 cm
 profundidade efetiva do assento: 25 - 37 cm
 altura do encosto: 57 - 70 cm
 largura do encosto: 18* - 34 cm
 distância entre o pé e o assento: 23 - 40,5 cm, 7 posições

*os valores são dados com almofadas

Peso total: 20 - 24 kg
 Comprimento do carrinho: 82 - 135 cm
 Altura do carrinho: 108 - 123 cm
 Largura do carrinho de bebê: 65 cm

NOTA IMPORTANTE! A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um técnico, médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.



RDC Medical MyWam®



RDC MEDICAL



Rua das Hortas, 75, 4795-490, STS



www.rdcmedical.pt



alfa



CE MD MEDICAL DEVICE - CLASS I

NEW

INFORMAÇÕES GERAIS

O carrinho para crianças com necessidades especiais **ALFA** é dedicado a crianças com uma altura de **100 – 150 cm** e um peso máximo de **55 kg**.

A sua construção extensa e sólida, composta por uma estrutura, assento e encosto separado, torna-o extremamente durável e facilita significativamente a montagem e o transporte do dispositivo.

Graças à função "I Grow With You", o Alfa permite-lhe alargar suavemente a profundidade do assento (**de 30 a 40 cm**) e a altura do encosto (**de 59 a 74 cm**).

Combinado com a possibilidade de reclinção rápida do encosto, basculação, apoio para os pés ajustável e almofadas ajustáveis, obtemos um produto abrangente que garante o máximo conforto, segurança e funcionalidade por muitos anos.

Por último, mas não menos importante, o **ALFA** também possui um design moderno, o que o torna ainda mais universal e atraente.

INDICAÇÕES

- paralisia e paresia dos membros inferiores
- paralisia e paresia do tronco
- enfraquecimento dos músculos posturais responsáveis pela manutenção da posição corporal correta
- paralisia cerebral
- mielomeningocele
- distrofias musculares

CONTRAINDICAÇÕES

Em caso de contraindicações para a posição sentada e/ou verticalização passiva, os ajustes do carrinho devem ser efetuados por um técnico especializado.



BASCULAÇÃO



RECLINAÇÃO ENCOSTO



APOIO PARA OS PÉS AJUSTÁVEL



CONSTRUÇÃO

A estrutura do **carrinho** de bebê para PCI ALFA é composta por dois elementos básicos: estrutura do banco e estrutura do encosto. O encosto é fixado ao assento com a ajuda de um mecanismo de bloqueio simples (consulte o manual para obter detalhes).

ATENÇÃO! Antes de colocar o seu filho no carrinho de bebê, certifique-se de que o mecanismo de bloqueio do encosto está devidamente bloqueado em ambos os lados do carrinho, para isso pegue no encosto e agite-o suavemente. Um encosto instalado corretamente permanecerá em sua posição.



MODIFICANDO PARÂMETROS

Com a ajuda de acessórios selecionados e alguns movimentos simples, podemos adaptar o **carrinho para necessidades especiais ALFA às necessidades das crianças cuja altura e peso estão dentro dos parâmetros atribuídos ao modelo** (altura 100 – 150 cm, peso até 55 kg).


O carrinho tem almofadas pélvicas e laterais ajustáveis (1), apoio de cabeça ajustável em altura (2), encosto ajustável em altura e reclinção (3), assento inclinado com ajuste de profundidade (4) e apoio para pés ajustável (5).




EQUIPAMENTOS



PADS LATERAIS

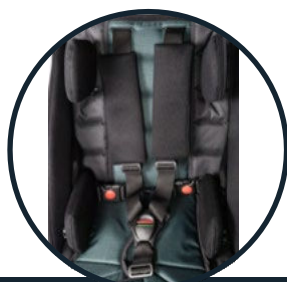ALMOFADAS
LATERAIS E PÉLVICASBARRA DE
SEGURANÇA

CINTO DE ABDUÇÃO

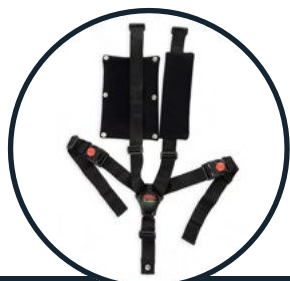CINTO DE CINCO
PONTOS

CUNHA AJUSTÁVEL

TABULEIRO AJUSTÁVEL EM
ÂNGULOCOBERTURA COM
JANELA

ENCOSTO



MOCHILA



CESTO DE COMPRAS



GUARDA-SOL



REDE MOSQUITOS



CAPA DE CHUVA



SACO DE DORMIR

PARÂMETROS TÉCNICOS DO CARRINHO

Largura do assento: 27 - 32 cm*, 41 cm**

Profundidade efetiva do assento: 30 - 40 cm

Altura do encosto: 59 - 74 cm

Largura do encosto: 27 - 32 cm*, 40 cm**

Distância entre o pé e o assento: 30 - 40 cm, 8 posições

Peso total: 26 kg

Comprimento do carrinho: 100 - 145 cm

Altura do carrinho de bebê: 107 - 128 cm

Largura do carrinho de bebê: 66 cm

*os valores são dados com almofadas ou **) sem almofadas

NOTA IMPORTANTE! A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um técnico, médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.



RDC MEDICAL



Rua das Hortas, 75, 4795-490, STS



www.rdcmedical.pt

RDC Medical MyWam®

YETI
JR.



NEW

INFORMAÇÕES GERAIS

O carrinho para crianças com PCI YETI foi concebido para crianças maiores/mais velhas que não conseguem andar ou sentar-se numa posição correta em resultado de lesões, doenças ou disfunções motoras. O carrinho é adequado para utilizadores com altura entre **130 – 175 cm** e um peso máximo de **80 kg**.

Equipado com o **sistema "I Grow With You"** (extensão suave da altura do encosto e profundidade do assento à medida que a criança cresce) e sistema de tensão ajustável que permite ajustar a tensão adequada dos estofos tanto no assento como no encosto garante-lhe um apoio durante muitos anos.

YETI



MEDICAL DEVICE - CLASS I

CARRINHO PARA CRIANÇAS COM PCI

Além disso, a **suspensão sólida do YETI**, juntamente com um mecanismo de encarte rápido, basculação do assento, encosto reclinável e uma ampla gama de acessórios simplificam significativamente o uso diário, independentemente das condições climáticas e da época do ano. O design moderno e prático é o seu trunfo adicional.

INDICAÇÕES

paralisia e paresia de membros inferiores de várias origens, paralisia e paresia do tronco, enfraquecimento dos músculos posturais responsáveis por manter a posição corporal correta, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofias musculares.

CONTRAINDICAÇÕES

Em caso de contraindicações para a posição sentada e/ou verticalização passiva, os ajustes do carrinho devem ser efetuados por um técnico especializado.

CARACTERÍSTICAS / SEGURANÇA E CONFORTO

BASCULAÇÃO DO ASSENTO

mecanismo simples



9,5° - 29°

5 posições

ENCOSTO RECLINÁVEL

Ampla gama de ajustes



3° - 99°

8 posições

APOIO DE PÉS AJUSTÁVEL EM ÂNGULO E ALTURA

ajuste simples e rápido



80° - 180°

6 posições

COR

estofos pretos / cinza claro



estofos jeans azuis



estofos verdes



NEW

MYWAM LLC

PARA-VENTO

estofos multifuncionais



O **Yeti** está equipado com para-ventos multifuncionais que não só são úteis em condições de vento, mas também protegem o utilizador

ESTRUTURA LEVE DOBRÁVEL

Facilidade de armazenamento e transporte



O carrinho Yeti permite uma dobragem rápida e fácil que facilita o uso diário, armazenamento e transporte.

APOIO À CONDUÇÃO

Conforto para as viagens mais acidentadas



O carrinho é equipado com **suspensão traseira ajustável** nas rodas traseiras, rodas dianteiras giratórias com opção de bloqueio direcional, **travão central e trepa passeios**.

ACESSÓRIOS FUNCIONAIS NA PRÁTICA



1

Cobertura com janela



2

Almofadas redutoras e cinto de segurança de 5 pontos



3

Cintos de abdução



4

Proteções do frame



5

Rodízios dianteiros giratório com bloqueio direcional



6

Quick release nas 4 rodas



EQUIPAMENTOS



ALMOFADAS REDUTORAS



ENCOSTO DE CABEÇA



CINTOS DE ABDUÇÃO



BARRA DE SEGURANÇA



CINTOS DE CINCO PONTOS



CUNHA AJUSTÁVEL



TABULEIRO DE ATIVIDADES



COBERTURA COM JANELA



LUVAS DE INVERNO



MALA DE VIAGEM



CESTO DE COMPRAS



GUARDA-SOL



CAPA DE CHUVA



SACO DE DORMIR



REDE MOSQUITOS

PARÂMETROS TÉCNICOS DO CARRINHO

Largura do assento: 28*/43 cm

Profundidade efetiva do assento: 31 - 45 cm

Altura do encosto: 65 - 85 cm

Largura do encosto: 25*/42 cm

Distância entre o pé e o assento: 28,5 - 43,5 cm, 7 posições

*os valores são dados com encartes

Peso total: 23 - 26 kg

Comprimento do carrinho: 114,5 - 146 cm

Altura do carrinho de bebê: 117 - 133 cm

Largura do carrinho de bebê: 67 cm

NOTA IMPORTANTE! A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.



RDC MEDICAL



Rua das Hortas, 75, 4795-490, STS



www.rdcmedical.pt

CADEIRA DE BANHO PARA CRIANÇAS COM PCI

delfi

A **cadeira de banho DELFI** foi projetada para pacientes jovens com peso de até **30 kg**. A sua principal tarefa é permitir que o cuidador realize livremente atividades de banho e higiene, proteção adequada e posicionamento ideal para o utilizador.

Possui inúmeros acessórios, como um apoio de cabeça ajustável, um cinto estabilizador do tronco e alças estabilizadoras das pernas que contribuem significativamente para a segurança do utilizador durante o banho. Os suportes inferiores são envoltos em espuma, proporcionando aderência e protegendo as superfícies contra riscos.



CE MD MEDICAL DEVICE - CLASS I

NEW



CONSTRUÇÃO

A **cadeira de banho DELFI** tem estrutura de construção com pescoço **ajustável (1)**, quadril **(2)** e coxa **(3)**. Possui também ajuste de profundidade do assento, permitindo que o dispositivo seja ajustado às necessidades individuais do paciente.

A estrutura leve é feita de tubos de alumínio preenchidos com espuma de poliuretano, impedindo a entrada de água no seu interior. Os estofos perfurados são feitos de tecido sintético inerte à água, o que afeta o curto tempo de secagem do assento de banho.

Este equipamento leve (4,9 kg) e compacto funciona bem em casa, tanto na banheira como no chuveiro.

MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS



O assento **de banho DELFI** tem uma faixa de ajuste específica para a profundidade do assento. Combinado com estofos flexíveis, é possível obter um dispositivo adaptado às necessidades individuais de um pequeno paciente.

FUNCIONALIDADES

ÂNGULO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO DE CABEÇA

A função de ajuste do ângulo do encosto de cabeça permite ajustar a posição segura e confortável da cabeça da criança durante o banho.



ÂNGULO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO

O ajuste do ângulo traseiro permite que o utilizador se sente na posição ideal, o que garante conforto e segurança durante o banho.



ÂNGULO DE RECLINAÇÃO DO APOIO DE PÉS

Ajustar o ângulo do encosto da perna permite ajustar a posição ideal das pernas da criança durante o banho, permitindo que o cuidador realize livremente atividades de higiene na posição mais conveniente.



ACESSÓRIOS

ENCOSTO DE CABEÇA

O apoio de cabeça ajustável protege e estabiliza a cabeça da criança durante o banho.



CINTO DE ESTABILIZAÇÃO

O cinto para o tronco estabiliza o utilizador durante o banho, evitando que a criança deslize para fora da cadeira de banho.



FAIXAS ESTABILIZADORAS

Duas faixas estabilizadoras individuais permitem proteger e imobilizar as pernas do utilizador durante as atividades de higiene e banho.



Novas cores

NEW

três tamanhos de cadeira de banho



PARÂMETROS TÉCNICOS DAS CADEIRAS DE BANHO

Comprimento da cadeira de banho: **137 - 141 cm**

Largura da cadeira de banho: **39 cm**

Profundidade efetiva do assento: **38 - 42 cm**

Comprimento do encosto: **45 cm**

Comprimento do apoio da cabeça: **16 cm**

Comprimento do apoio para os pés: **37 cm**

Altura do assento do solo: **44 cm**

Peso máximo do utilizador: **30 kg**

Altura do utilizador (aproximada): **130 cm**

Comprimento da cadeira de banho: **152 - 156 cm**

Largura da cadeira de banho: **44 cm**

Profundidade efetiva do assento: **38 - 42 cm**

Comprimento do encosto: **51 cm**

Comprimento do apoio da cabeça: **20 cm**

Comprimento do apoio para os pés: **47 cm**

Altura do assento do solo: **44 cm**

Peso máximo do utilizador: **50 kg**

Altura do utilizador (aproximada): **150 cm**

Comprimento da cadeira de banho:

170 - 180 cm

Largura da cadeira de banho: **49 cm**

Profundidade efetiva do assento:

40 - 50 cm

Comprimento do encosto: **60 cm**

Comprimento do apoio da cabeça: **25 cm**

Comprimento do apoio para os pés: **55 cm**

Altura do assento do solo: **44 cm**

Peso máximo do utilizador: **80 kg**

Altura do utilizador (aproximada):

180 cm

NOTA IMPORTANTE! A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um técnico, médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.



RDC MEDICAL



Rua das Hortas, 75, 4795-490, STS



www.rdcmedical.pt



go.spider

O **andarelo go.spider** foi concebido para os utilizadores mais jovens com deficiências que os impedem de se mover de forma independente. A sua principal tarefa é apoiar a educação e a reeducação da marcha com a ajuda de um cuidador. É dedicado a crianças com uma altura de **100 – 135 cm** e um peso de até **35 kg**.

O seu design simples e pequenas dimensões fazem dele um equipamento versátil, adequado para uso interior e exterior. Quando dobrado, ocupa pouco espaço, facilitando o armazenamento ou o transporte.

O **andarelo go.spider** tem rodas dianteiras funcionais com bloqueio giratório de rodízio, dando ao utilizador mais controlo ao se mover.

O **andarelo go.spider** é um **Dispositivo Médico Classe I**, indicado para uso por aqueles que, devido à sua condição, não conseguem andar e/ou ficar de pé de forma independente.



NEW



MEDICAL DEVICE - CLASS I

CONSTRUÇÃO

O **andarelo go.spider** tem um design simples e pequenas dimensões quando dobrado, que podem ser reduzidas ainda mais removendo a extensão superior.

Este equipamento leve (**5,65 kg**) e compacto também é perfeito para utilização no exterior. Graças às suas dimensões compactas quando dobrado (**80 x 68 x 28 cm**), é possível encaixá-lo no porta-malas de qualquer carro, levá-lo para qualquer lugar e desfrutar da independência que este dispositivo permite ao utilizador.



INDICAÇÕES

- reabilitação após procedimentos
- cirúrgicos com fraqueza dos membros inferiores
- com perturbações do equilíbrio quando a criança é incapaz de se mover com muletas, etc.

CONTRAINDICAÇÕES

Lesões nos membros superiores que incapacitam o utilizador a se supor no

ARNÊS DE SEGURANÇA

Um arnês personalizado com correias ajustáveis proporciona ao utilizador um apoio adicional, aliviando a pressão sobre o tronco. A montagem consiste em fixar as correias aos componentes da extensão superior.

Com alguns passos simples, um andariço personalizado pode ser adaptado para crianças que necessitam de mais apoio.



MODIFICAÇÃO DAS DIMENSÕES

Graças aos ajustes básicos, é possível adaptar os parâmetros do **andarilho go.spider** às necessidades do utilizador. Ao ajustar a altura da extensão superior, a altura das alças de suporte pode ser ajustada. Além disso, alterando a inclinação das alças, o espaçamento pode ser ajustado em alguns passos simples.



FUNCIONALIDADES DO ANDARILHO

BLOQUEIO GIRATÓRIO DA RODA DIANTEIRA

A função *swivel lock* nas rodas dianteiras permite ao utilizador controlar a direção de marcha. O bloqueio pode ser aplicado quando se conduz em linha reta. Ao desbloquear o bloqueio, as rodas são libertadas para responder à pressão e inclinação do corpo da criança. Isto é perfeito para uma condução dinâmica, jogar no campo desportivo, no parque infantil ou manobrar em pequenos espaços.




TRAVÃO DE ATRITO DA RODA TRASEIRA

A capacidade de abrandar a roda traseira serve para aumentar o controlo do utilizador sobre o ritmo do movimento. Um botão móvel permite-lhe aumentar a pressão sobre as rodas, reduzindo assim a sua velocidade. Esta função é indicada para utilizadores menos experientes e para crianças incapazes de controlar a sua própria velocidade. Afrouxar a pressão significa mais liberdade para regular a velocidade e também a possibilidade de realizar manobras dinâmicas.



BLOQUEIO DA ROTAÇÃO REVERSA

O andarilho go.spider tem bloqueio sobre as rodas traseiras que impedem o curso descontrolado em marcha-atrás. Quando o bloqueio é acionado sobre a roda, o elemento de bloqueio resiste e o dispositivo para quando o utilizador dá os primeiros passos e não tem controlo total sobre o sentido de marcha.

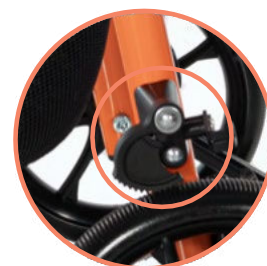

ACESSÓRIOS

ASSENTO

O pequeno assento reclinável permite que o utilizador descanse após um esforço prolongado.



APOIO DO ANTEBRAÇO

Os apoios de braços flexíveis e ajustados proporcionam um apoio confortável e estável para os antebraços da criança.



SUPORTE PÉLVICO

Suporte adicional para o utilizador sentir confiança e estabilidade no momento do movimento..



TRAVÕES DE MÃO

Permitem mais controlo sobre a velocidade do movimento. Além disso, têm uma função de travão de estacionamento.



RODAS ANTI-VOLTEIO

Os suportes fornecem proteção adicional contra a possível queda do andarilho.



BARRA DE GUIA DE AUXÍLIO

Permite ao cuidador assistir ao passeio da criança e controlar a sua velocidade e direção.



COMING SOON...



TAMANHO M

TAMANHO L

PARÂMETROS TÉCNICOS DO ANDARILHO

Peso máximo uti.: 35 kg
Altura utilizador: 100 - 135 cm
Peso total: 5,65 kg
Comp. do andarilho: 80 cm
Altura do andarilho: 51 - 82 cm
Largura do andarilho: 66 cm

Peso máximo uti.: 50 kg
Altura do utilizador: 130 - 150 cm
Peso total: 10 kg
Comp. do andarilho: 92 cm
Altura do andarilho: 65 - 83 cm
Largura do andarilho: 68 cm

Peso máximo uti.: 70 kg
Altura do uti.: 150 - 170 cm
Peso total: 13 kg
Comp. do andarilho: 95 cm
Altura do andarilho: 74 - 100 cm
Largura do andarilho: 72 cm

NOTA IMPORTANTE! A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um técnico, médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.





RDC Medical

**Distribuidor Oficial em
Portugal**