



RDC Medical MyWam®



RDC MEDICAL



Rua das Hortas, 75, 4795-490, STS



www.rdcmedical.pt



alfa



CE MD MEDICAL DEVICE - CLASS I

NEW

INFORMAÇÕES GERAIS

O carrinho para crianças com necessidades especiais **ALFA** é dedicado a crianças com uma altura de **100 – 150 cm** e um peso máximo de **55 kg**.

A sua construção extensa e sólida, composta por uma estrutura, assento e encosto separado, torna-o extremamente durável e facilita significativamente a montagem e o transporte do dispositivo.

Graças à função "I Grow With You", o Alfa permite-lhe alargar suavemente a profundidade do assento (**de 30 a 40 cm**) e a altura do encosto (**de 59 a 74 cm**).

Combinado com a possibilidade de reclinção rápida do encosto, basculação, apoio para os pés ajustável e almofadas ajustáveis, obtemos um produto abrangente que garante o máximo conforto, segurança e funcionalidade por muitos anos.

Por último, mas não menos importante, o **ALFA** também possui um design moderno, o que o torna ainda mais universal e atraente.

INDICAÇÕES

- paralisia e paresia dos membros inferiores
- paralisia e paresia do tronco
- enfraquecimento dos músculos posturais responsáveis pela manutenção da posição corporal correta
- paralisia cerebral
- mielomeningocele
- distrofias musculares

CONTRAINDICAÇÕES

Em caso de contraindicações para a posição sentada e/ou verticalização passiva, os ajustes do carrinho devem ser efetuados por um técnico especializado.



BASCULAÇÃO



RECLINAÇÃO ENCOSTO



APOIO PARA OS PÉS AJUSTÁVEL



CONSTRUÇÃO

A estrutura do **carrinho** de bebê para PCI ALFA é composta por dois elementos básicos: estrutura do banco e estrutura do encosto. O encosto é fixado ao assento com a ajuda de um mecanismo de bloqueio simples (consulte o manual para obter detalhes).

ATENÇÃO! Antes de colocar o seu filho no carrinho de bebê, certifique-se de que o mecanismo de bloqueio do encosto está devidamente bloqueado em ambos os lados do carrinho, para isso pegue no encosto e agite-o suavemente. Um encosto instalado corretamente permanecerá em sua posição.



MODIFICANDO PARÂMETROS

Com a ajuda de acessórios selecionados e alguns movimentos simples, podemos adaptar o **carrinho para necessidades especiais ALFA às necessidades das crianças cuja altura e peso estão dentro dos parâmetros atribuídos ao modelo** (altura 100 – 150 cm, peso até 55 kg).

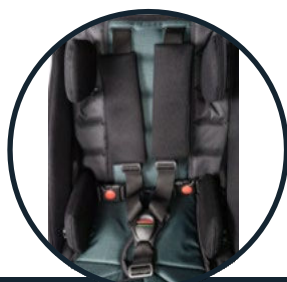
O carrinho tem almofadas pélvicas e laterais ajustáveis (1), apoio de cabeça ajustável em altura (2), encosto ajustável em altura e reclinção (3), assento inclinado com ajuste de profundidade (4) e apoio para pés ajustável (5).



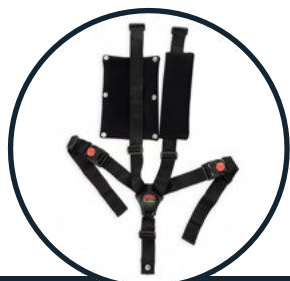
EQUIPAMENTOS



PADS LATERAIS

ALMOFADAS
LATERAIS E PÉLVICASBARRA DE
SEGURANÇA

CINTO DE ABDUÇÃO

CINTO DE CINCO
PONTOS

CUNHA AJUSTÁVEL

TABULEIRO AJUSTÁVEL EM
ÂNGULOCOBERTURA COM
JANELA

ENCOSTO



MOCHILA



CESTO DE COMPRAS



GUARDA-SOL



REDE MOSQUITOS



CAPA DE CHUVA



SACO DE DORMIR

PARÂMETROS TÉCNICOS DO CARRINHO

Largura do assento: 27 - 32 cm*, 41 cm**

Profundidade efetiva do assento: 30 - 40 cm

Altura do encosto: 59 - 74 cm

Largura do encosto: 27 - 32 cm*, 40 cm**

Distância entre o pé e o assento: 30 - 40 cm, 8 posições

Peso total: 26 kg

Comprimento do carrinho: 100 - 145 cm

Altura do carrinho de bebê: 107 - 128 cm

Largura do carrinho de bebê: 66 cm

*os valores são dados com almofadas ou **) sem almofadas

NOTA IMPORTANTE! A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um técnico, médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.